

NLS INSTALLATION MANUAL

Manual de instalare NLS



NLS Device



Bio-inductor



Resonant chamber



Extension cord of inductor



USB cable




Dongle




Flash disk

1. Atunci când instalați sau utilizați software-ul, trebuie să închideți mai întâi toate programele antivirus.
2. După instalare, puteți merge la setările software-ului antivirus și găsiți secțiunea Exclusions (Excluderi), adăugați software-ul NLS la o listă de excluderi. Apoi, software-ul antivirus nu vă va mai deranja. (De fapt, nu există niciun virus în software, deoarece software-ul nostru este criptat și antivirusul îl consideră virus).
3. Utilizați cablul USB pentru a conecta dispozitivul NLS la computer.

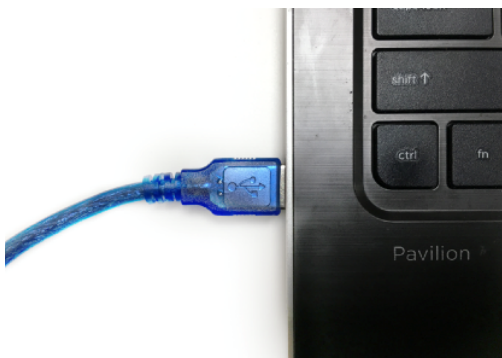

4. Introduceți memoria portabila (Flash disk) în computer.

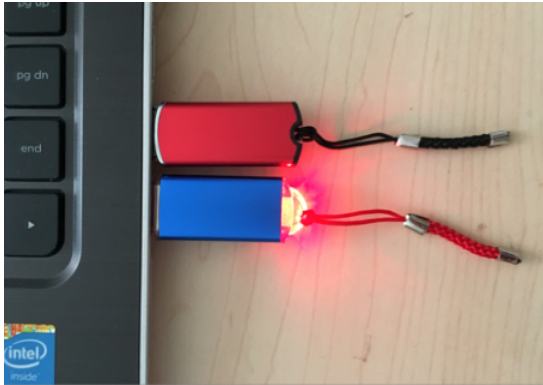


**Fără lumină este un Dongle.
Atunci când instalați software-ul și utilizați
software-ul, acest Dongle trebuie să fie
întotdeauna introdus în computer. Este o
cheie pentru a utiliza acest dispozitiv.**


**Cu lumină roșie este o memorie portabila
pentru instalare.**

5. Faceți dublu clic pe fișierul Setup.



6. Faceți clic pe Next > (Următorul)

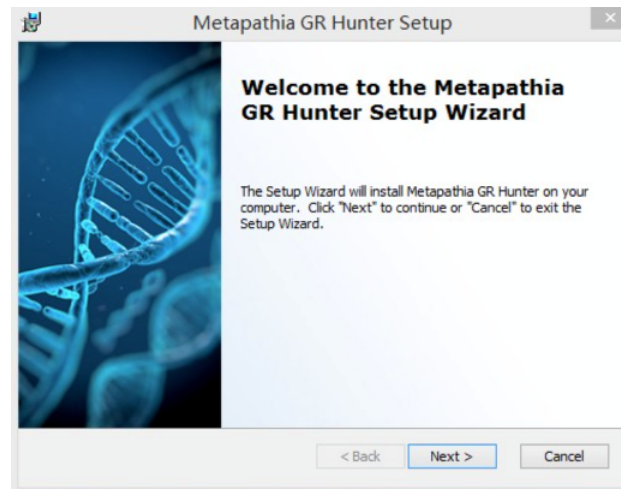

7. Nu modificați directorul de instalare, faceți clic pe Next >.

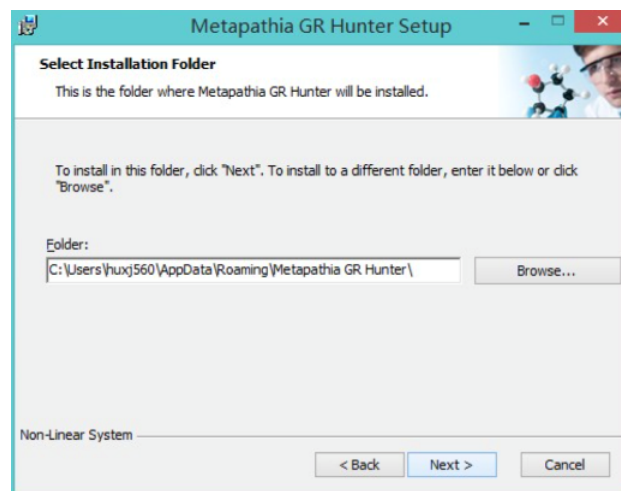

8. Faceți clic pe Install (Instalare), apoi pe Finish (Terminare).

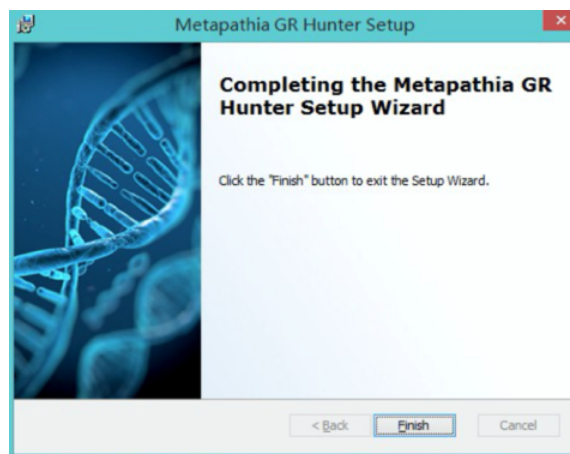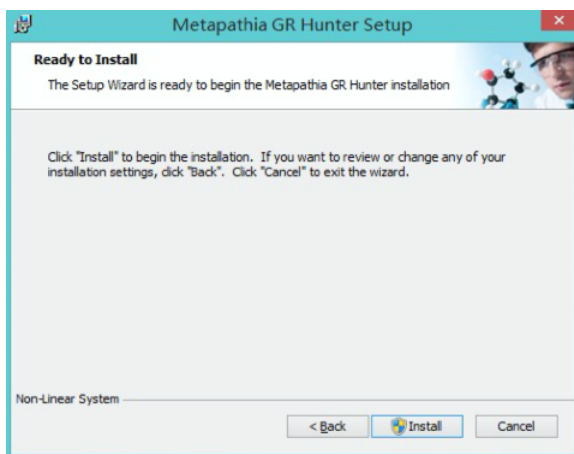

9. Bio-inductor-ul (castile) trebuie purtat(e) pe ureche și acoperit bine, nu trebuie să aibă scurgeri evidente, deoarece lumina puternică va afecta rezultatul sau va opri brusc scanarea.



ATENȚIE!

In cazul in care aveti instalat pe calculator alt program soft (driver) de diagnosticare prin biorezonanta, programul nu se va instala corect, in acest caz fiind necesar sa dezinstalati initial softul si driverele vechi si abia apoi sa aplicati instalarea (pasii 1-9).