

INHALÁCIÓS KAMRA

Használati útmutató

Modell: RedLine MistChamber

A gyógyszerek egyszerűbb és hatékonyabb beadása érdekében az orvosok azt javasolják, hogy az inhalátoron kívül használja a szeleppel (távtartóval) ellátott inhalációs kamrát.


A **RedLine MistChamber** inhalációs kamra antisztatikus anyagokból készült hordozható készülék, amely alkalmas légúti betegségben szenvedők számára. Olyan betegek számára is ajánlott, akik számára az aeroszolos inhalátorok használata nehéznek tűnik. Segítségével a gyógyszerek lassan adhatók be, és így a felhasználó felkészülve lélegezhet.

A RedLine MistChamber inhalációs kamra használatának előnyei



Ha csak az inhalátort használj

A gyógyszer gyakran eljut a szájba, a torokba vagy a gyomorba, és nehéz szinkronizálni a permetezés idejét a légzéssel. Az okozott kellemetlen íz mellett mellékhatásai is lehetnek.

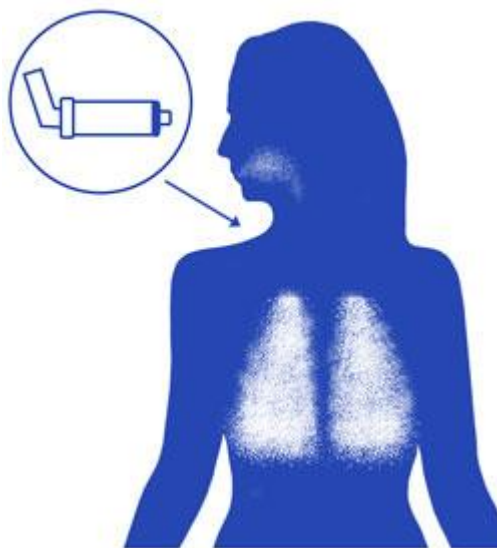

Ha az inhalátort a MistChamber inhalációs kamrával együtt használja

A gyógyszert nagyobb mennyiségben adják a tüdőben, ahol hatékonyabb. A távtartó használatának további előnye, hogy már nem szükséges összehangolni az inhalátor működését az inspirációval.



BELÉGZŐ SZELEP

Az alacsony ellenállású szelepet úgy tervezték, hogy még alacsony áramlási viszonyok között is kinyíljon, ami lehetővé teszi a felhasználó számára a könnyű légzést.



MDI ADAPTER

A **Redline MistChamber** inhalációs fényképezőgép rendelkezik az MDI adapterrel, amelyet tökéletesen megterveznek a mért dózisú inhalátorok számára.


A csomagolás csak az inhalációs csövet és a maszkot tartalmazza, a leíró képeken látható inhalációs spray csak az eszköz működésének magyarázatára szolgál.

Alkatrészek


1. Maszk (a választott csomagtól függően)
2. Antisztatikus kamra
3. MDI adapter

Használat


1. Távolítsa el a fedelet az inhalátorból.

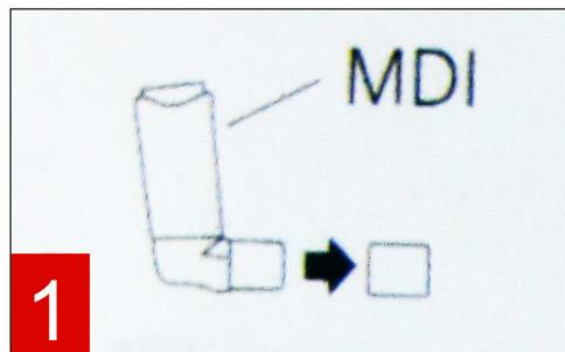

2. Készítse elő az inhaláló készüléket az inhalációs kamrahoz.

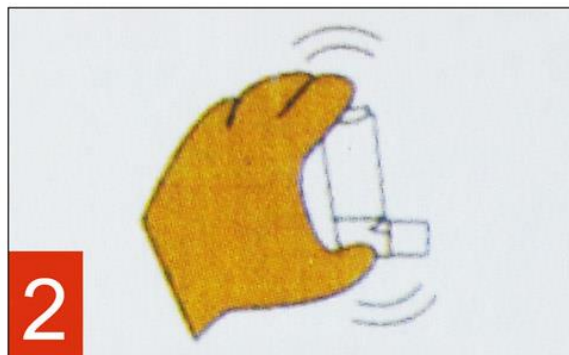

3. Óvatosan helyezze be az inhalátor szájrészt a kamera mögött.

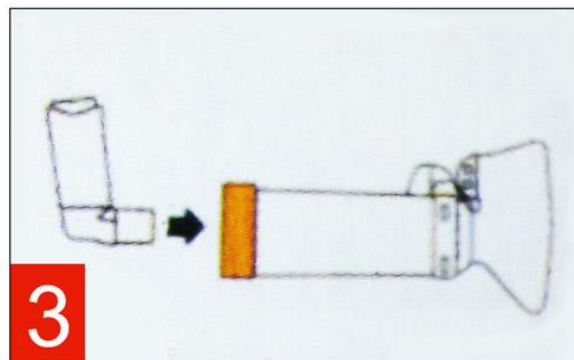

4. Tartsa a maszkot az orr és a száj felett. Nyomja meg és engedje fel a gyógyszert. Inspirálni és kilégni 6 alkalommal.

Ha kezelőorvosa bizonyos típusú kezelést írt elő, kövesse az előírt utasításokat.






FIGYELEM!

Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy nincs-e rajta szennyeződés a maszkban és az inhalációs kamrában.

Amikor a maszkot gyermekek használják, vagy azok közelében kell felügyelni őket. A maszkot csak kezelésre használja, majd tárolja tiszta helyen, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá.

Tisztítás és tárolás.

1. Óvatosan távolítsa el a maszkot az inhalációs kamrából.
2. Rázzuk fel a darabokat meleg vízben és szappantartóban 2 percig, hagyjuk őket áztatni 10 percig.
3. Tisztítsa meg a maszkot és az inhalációs kamrát tiszta forró vízszugárral, és rázza fel a felesleges páratartalmat. Mielőtt a maszkot felhelyezi a helyiségbe, hagyja, hogy a komponensek kiszáradjanak a száraz levegőre.
4. Csatlakoztassa a maszkot a szobába, és tárolja száraz, hűvös helyen, távol a közvetlen napfénytől.

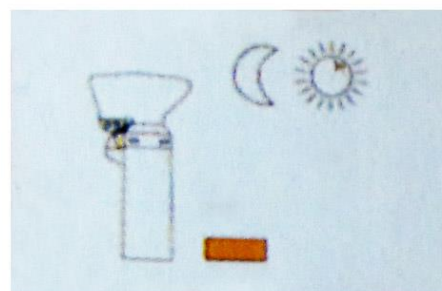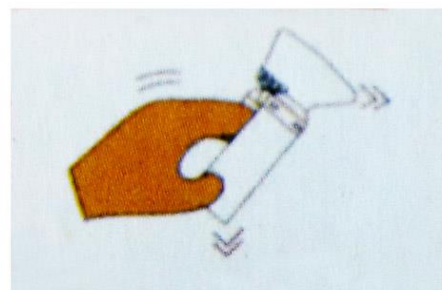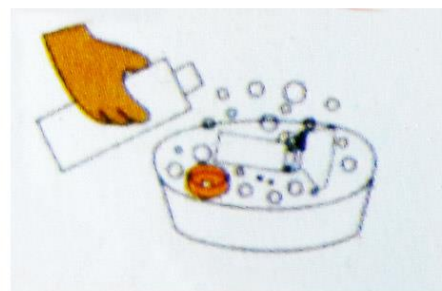

Vigyázat!

Ne sterilizáljuk vagy forraljuk!

JELLEMZŐK:

- Antisztatikus inhalációs kamra;
- Lágy PVC maszk, nem mérgező (a maszkot tartalmazó csomagokhoz);
- alacsony ellenállású inhalációs szelep;
- A gyógyszerek hatékony beadása;
- 180 ml térfogat.
- Az inhalációs kamra méretei (maszk nélkül): 15 x 5,3 x 5,3 cm.
- Szoba súlya (maszk nélkül): 55 g

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL Bukarest, tel: +40 21 211 06 52, www.bitonline.ro.