

Kézi orrszívó csecsemőknek és gyermekeknek

FLAEM Baby



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.

A Flaem Baby orrszívó egy szabadalmaztatott eszköz, praktikus, könnyen használható és higiénikus. Valójában csak egy kéz mozdulatát igényli, és nem szükséges az anya száján át történő leszívása, mint általában a forgalomban lévő többi porszívó esetében, így elkerülhető a mikrobiális szennyeződés lehetséges problémája.

MIÉRT KELL MEGSZÍVNI A FELÜLLETES NYÁKOT?

A jó légzés az első védekezés a baba számára, hogy megvédje magát a fertőzésekkel szemben. Az 1 évesnél fiatalabb csecsemők kizárólag az orron keresztül lélegeznek. Ezért, ha az orra el van dugulva, a baba nehezen lélegzik, alvási és étkezési nehézségei vannak; ő is megtagadhatja az evést és nagyon gyakran sír.

Tekintettel arra, hogy 3 éves koráig a gyermek nem tudja egyedül kifújni az orrát, a baktériumokkal, vírusokkal és porszemcsékkel szennyezett nyálka stagnál és eltömíti az orrjáratokat.

Az orr megfelelő tisztításához két módszer van a leginkább javasolt:

- Jó lemosás, a nyálkahártya lágyítására, mégpedig orröblítő segítségével (a Flaem orröblítők használatát javasoljuk);
- Nyálka eltávolítása orrszívó segítségével.


FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra. A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Fontos, hogy elolvassa és megértse a használati utasítást. További felvilágosításért forduljon kereskedőjéhez.

Gyermekek és csökkent fizikai, motoros és szellemi képességű személyek általi használat esetén a készüléket olyan felnőtt szigorú felügyelete mellett kell használni, aki elolvasta ezt a kézikönyvet. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

A CSOMAG TARTALMA

1. Ergonomikus puha hegyek (2 db);
2. Test külső szárnyakkal, amelyek könnyű és biztos fogást tesznek lehetővé és nyálkagyűjtő kamra;
3. Ív;
4. Dugattyú;
5. Tömítőgyűrű.

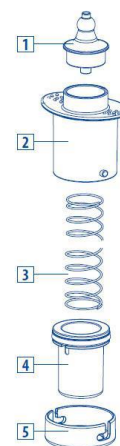

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Minden használat előtt alaposan mosson kezet és tisztítsa meg a porszívót az alábbiak szerint:

- Nyissa ki az orrszívót a tömítőgyűrű (5) elfordításával, figyelni a rugó tolóerejét (3);
- Mossa le az alkatrészeket meleg ivóvízzel (kb. 40 °C-os). enyhe mosogatószerrel (nem dörzsölő), vagy mosogatógépben forró ciklus. A fertőtlenítőszeres higiénia is használható általánosan forgalmazott, de ennek megfelelően használják konkrét utasításait;
- Az alkatrészek mosása vagy fertőtlenítése után jól rázzuk fel, majd helyezzük papírtörlőre, vagy meleg levegősugárral szárítsuk meg (például hajszárítóval);
- A készülék összeszerelése előtt kenje be a dugattyútömítést gyermekeknek szánt hidratáló olajjal.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Javasoljuk, hogy a szilikon hegyet egy személy használja, valamint a gyakori cserét, hogy elkerülje a tartályok kockázatát.

- Tartsa a porszívót, mint egy fecskendő;
- Helyezze a porszívó orrhegyét a gyermek orrlyukába;
- Hüvelykujjával nyomja meg a dugattyú alsó részét (következő kép); a levegő a készülék testének alján lévő nyílásokon keresztül távozik, így elkerülhető, hogy nyomás ne lépjen fel a gyermek orrlyukaira. Ezt a lépést az orrhegynek a gyermek orrlyukaiba történő elhelyezése előtt is meg lehet tenni;
- Fokozatosan engedje el a dugattyút; így módon a váladék könnyen leszívódik a gyermek orrüregéből;
- Ismételje meg a műveletet a másik orrlyukkal.

IMPORTŐR: S.C. BITONLINE SRL, Bukarest, tel: +40212110652, www.bitonline.ro