


Novama White K orrszívó Használati utasítás

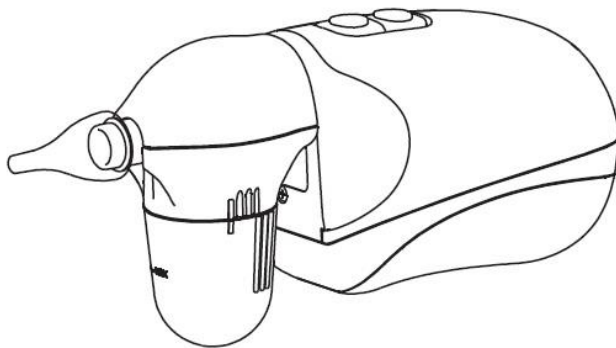

Kérjük, olvassa el az utasításokat a termék használata előtt.

Fő funkciók

1. Egyszerű kezelés – csak 2 gomb;
2. 2 üzemmód;
3. Alacsony zajszint - a készülék sokkal halkabban működik, mint egy szabványos orrszívó;
4. Az elérhető maximális teljesítmény - helyezze a porszívó hegyét az orrlyukba, majd folyamatosan, vagy szakaszosan (szünetekkel) távolítsa el a váladékot;
5. Biztonság - a puha, speciálisan profilált hegyek használatának köszönhetően a váladék leszívása biztonságos és fájdalommentes;
6. Kényelem - a készülék kompakt, kényelmesen tartható és könnyen használható. Ezenkívül biztonságos és könnyen használható;
7. Speciális kialakítású, könnyen tisztítható fej – a csúcsok, a váladéktartály és a készülék feje szétszedhető és folyó víz alatt mosható (ezek az alkatrészek forrásban lévő vízzel kiegészítve fertőtleníthetők);
8. Könnyű és csendes - akkor is használható, amikor a gyermek alszik;
9. Elemekkel működik - a készülék működéséhez csak 2 db 1,5 V-os AA alkáli elem szükséges; az akkumulátorok bárhol és bármikor könnyen cserélhetők.

Fontos tudnivalók használat előtt


Gondosan olvassa el az orrszívó használatára vonatkozó utasításokat a gyermekek váladékának megfelelő és biztonságos felszívásához.

Óvatos:

- Az orrszívó a váladék és a nyálka könnyű és hatékony eltávolítására szolgál az orrból 0 és 12 év közötti gyermekeknél, otthon;
- A váladék és a nyálka folyamatosan vagy szakaszosan szívható;
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a készüléket;
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak és közvetlen napfénynek;
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje erős ütés vagy leesés;
- Cserélje ki az összes elemet, ha a szivattyú teljesítménye és/vagy hangja gyengül a készülék használata közben;
- Javasoljuk, hogy távolítsa el az akkumulátort a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja;
- A készülék vákuum alkalmazása időszakos és átmeneti. A gomb hosszan tartó megnyomása elindítja a szívást, elengedve pedig leállítja a készüléket és ezzel leállítja a szívást;

- Az orrszívó csak a váladék és a nyálka orrból történő tisztítására/eltávolítására szolgál. Ne használja ezt a készüléket, csak arra a célra, amelyre szánták;
- A készülék használata során a gyermek nem tarthatja vissza a lélegzetét, nem zárhatja be a száját, és ne nyelje le a nyálát, hogy elkerülje a dobhártyára nehezedő egyenetlen nyomást az ebből eredő negatív nyomáson keresztül;
- Ha gyermeke rosszul érzi magát a készülék használata közben, állítsa le a szívást és azonnal forduljon orvoshoz;
- Ne alkalmazzon túlzott erőt, amikor a porszívó hegyét behelyezi az orrüregbe;
- Ez a készülék csak háztartási használatra szolgál. Orrbetegségek esetén forduljon orvoshoz;
- Minden használat előtt tisztítsa meg a porszívó hegyét;
- Ezt a készüléket olyan szülők vagy felnőttek használhatják, akik be tudják tartani a készülékhez mellélt használati útmutatóban foglalt ajánlásokat és megjegyzéseket. Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Ne engedje, hogy gyermekek maguk kezeljék a készüléket;
- Ne használja az orrszívót olyan betegeknél, akiknél a következő ellenjavallatok állnak fenn: orrvérzés, súlyos arc-, nyak-, fejsérülések, véralvadási zavarok;
- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a készülék használata előtt;
- A készülék nem megfelelő használata a következő kockázatokhoz/szövődményekhez vezethet: mechanikai sérülések, orr irritáció, nyálkahártya vérzés, kellemetlen érzés és fájdalom;
- Ne hagyja a hegyeket gyermekek számára elérhető helyen, nehogy véletlenül lenyeljék azokat;
- Kérjük, csak a Novama termékcsalád tippjeit használja.


Készülék leírása

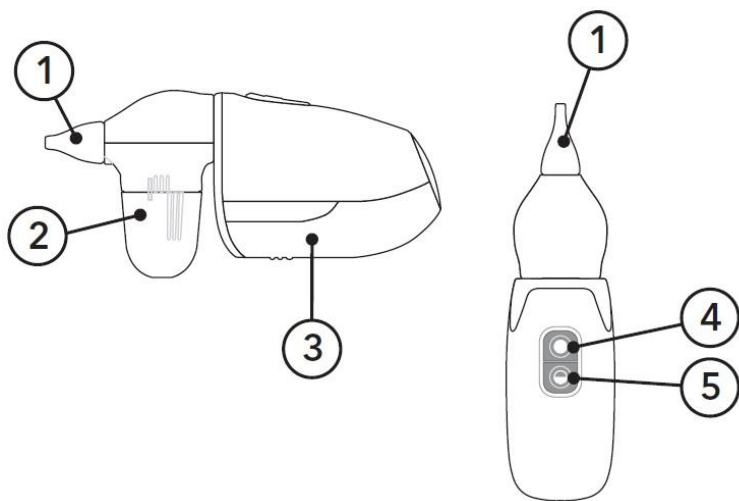

1. Csúcs;
2. Váladéktározó;
3. Elemtartó fedele;
4. Teljes bekapcsoló gomb;
5. Korlátozott bekapcsológomb.

Az elemek cseréje

1. Finoman csúsztassa el az elemtartó fedelét;
2. Óvatosan vegye ki a használt elemeket;
3. Mindig új elemeket használjon;
4. Helyezzen be két új elemet (1,5 V AA alkáli) a megfelelő polaritással;
5. Helyezze vissza a rekesz fedelét.

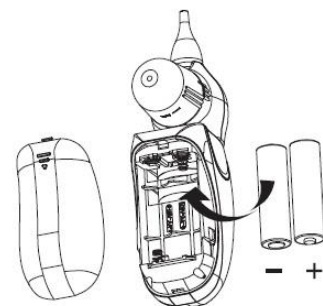


Óvatos:

- Ne hagyja az elemeket gyermekek számára elérhető helyen;
- Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, ajánlatos eltávolítani az akkumulátort;
- Az elemeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az elemeket ne dobja más hulladékkal együtt.

Használati útmutató


1. Válassza ki a baba orrlyukai formájának és méretének, valamint a váladékozás típusának megfelelő hegyet:
 - A nagy hegyet nagyobb gyermekek számára ajánljuk, és amikor gyakori a váladékozás;
 - A kis hegyet kisebb gyermekek számára ajánljuk, és amikor a szivárgások felhígulnak;
2. Győződjön meg arról, hogy a hegy jól illeszkedik, és teljesen bepattan a rögzítőgyűrűbe a fej kimeneténél.

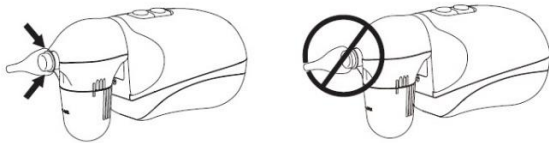

3. Kapcsolja be a szívást:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a teljes bekapcsológombot, hogy megkezdje a váladék maximális teljesítménnyel történő szívását;
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az alacsony teljesítményű gombot a váladék enyhébb leszívásához;

4. Tartsa egyenesen (függőlegesen) a gyermek fejét, és illessze a hegyét a gyermek egyik orrlyukába. Ügyeljen arra, hogy a hegyét ne nyomja túlságosan az orrlyukba, és ne nyomja meg az orrüreg hátsó falát. Próbálja meg a porszívót olyan helyzetben tartani, hogy a hegye merőleges legyen a gyermek arcának felületére. Ne irányítsa a hegyét felfelé a gyermek orrlyukába - ott főleg levegő van, alul pedig váladék (lásd a képet). Várja meg, amíg a porszívó magához vonzza a váladékot. Ha szükséges, ismételje meg a műveletet a másik orrlyukban.

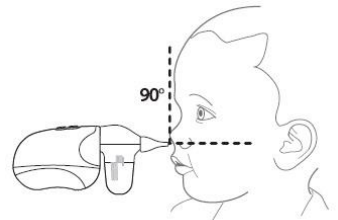


Hasznos tanácsok

- Előfordulhat, hogy a leszívott váladék nem jelenik meg azonnal a tartályban. Minden használat után ajánlatos gyorsan megtisztítani a hegyet, a fejjel és a tartállyal együtt, miután eltávolította őket a készülékről. A hatékonyabb szívás érdekében zárja el a gyermek másik orrlyukát;
 - Kis mennyiségű sóoldat vagy tengervíz permet segíthet elvékonyítani a váladékot. Az alkalmazás után várjon egy pillanatot, majd kezdje el szívni a váladékot;
 - A negatív nyomás okozta kényelmetlenség csökkentése érdekében nyissa ki a gyermek száját.
5. Engedje el a gombot a szívás leállításához.


Tisztítás és karbantartás

A váladéktartály, a fej és a porszívó hegyeinek tisztítása:

1. Óvatosan kicsúsztatva távolítsa el a hegyet és a fejet a készülékről;

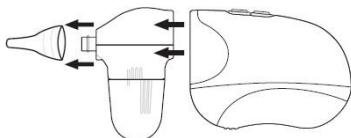

2. Csavarja le a váladékozó csészét az óramutató járásával megegyező irányban;

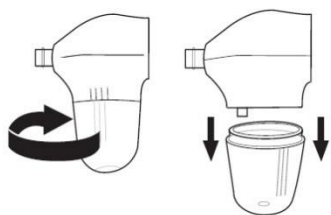

3. Mossa le az összes kicserélt alkatrészt vízzel és tisztítószerrel 3 percig;

4. Ezután öblítse le forró víz alatt 3 percig, és hagyja megszáradni. Tisztítás után ezek a tárgyak gőzzel fertőtleníthetők.

Figyelem: Ne mossa le a fejet és az egész készüléket szappannal vagy más tisztítószerrel.

A fő egység tisztítása:

1. Törölje le a készüléket tiszta, száraz és puha ruhával.

Óvatos:

- Ne mossa a készüléket vízzel vagy más folyadékkal (például oldószerrel vagy fehér alkohollal);
- Javasoljuk, hogy a készüléket puha ruhával törölje át, és tartsa tisztán a készüléket;
- Összeszerelés előtt hagyja megszáradni az összes alkatrészt;
- Ne tegye ki a készüléket nedvességnek, magas hőmérsékletnek és közvetlen napfénynek;
- A készüléket védeni kell az ütésektől és ütésektől.

Hibaelhárítás


Probléma	Lehetséges ok	MEGOLDÁS
Gyenge a szívás, vagy a készülék egyáltalán nem szív (a készülék nem működik).	Az elemek elhasználódtak vagy nem megfelelően vannak behelyezve.	Ellenőrizze a polaritást, az elemeket, vagy cserélje ki az elemeket újakra.
	A váladéktartály menetes foglalatából hiányzik a szürke gumigyűrű formájú tömítés.	Ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelően van-e beszerelve, vagy szerelje be megfelelően a váladéktartály kimenetébe.
	A váladéktartály helytelenül van beszerelve.	Győződjön meg arról, hogy a váladéktartály oldalán lévő jelölések egy vonalba esnek a készülék fején lévő jelölésekkel.

Műszaki adatok

Szívóerő	Maximális teljesítmény üzemmód ≥ 350 Hgmm (46,66 kPa) Teljesítménykorlátozott üzemmód ≥ 200 HGmm (26,66 kPa)
Hangnyomás	≤ 75 dB
Szívócsúcs anyaga	Szilikon
Motor	3V DC
Használati feltételek	hőmérséklet 16-35°C

	relatív páratartalom akár 85%
Tárolási feltételek	hőmérséklet -25°C ~ +55°C
	relatív páratartalom akár 85%
Akkumulátor	2 x 1,5 V AA alkáli elem
Elem élettartam	körülbelül 90 perc a használt elemek típusától és márkájától függően
Súly	kb. 127 g (elemek nélkül)
méret	körülbelül 155,5 x 42,5 x 70 mm

Szimbólumok

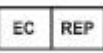Szimbólum	Meghatározás
	A CE-jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel az Európai Unió ilyen típusú eszközökre vonatkozó irányelveinek.
	A terméket a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
	Olvassa el a használati útmutatót.
	Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a termék használata előtt.
	BF típusú készülék
	Termelő
	Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban
	Korlátozza a hőmérsékletet
	Sorozatszám
	Tétel száma
	Védje a nedvességtől
	Védettségi fok – 12,5 mm vagy nagyobb átmérőjű tárgyak behatolása elleni védelem; védelem a vízcseppek ellen, amelyek függőlegesen esnek a ház 15 ° -os dőlésszögében.

HULLADÉKKEZELÉSI FELTÉTELEK



Ez a szimbólum a készülék dobozán azt jelenti, hogy ez a termék nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt.

A készüléket csak az érvényben lévő előírásoknak megfelelően engedélyezett újrahasznosító helyeken szabad leadni. A szabályok betartásával hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez.

EMC táblázat

Az NS18 az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való használatra készült. Az ügyfélnek vagy felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy ilyen környezetben használja.

Útmutató és gyártói nyilatkozat - Elektromágneses kibocsátás			
Jelenség	Az egészségügyi hivatásos egység környezete a)	Az otthoni környezet	
Vezetett és kisugárzott RF sugárzás	a)	RF-kibocsátás CISPR 11, 1. csoport, B osztály	
Harmonikus torzítások	Nem alkalmazható		
Feszültség-ingadozások és tapintás	Nem alkalmazható		
a) a) A berendezés alkalmas otthoni környezetben és professzionális egészségügyi környezetben való használatra, csak a betegszobákra és a kórházak vagy klinikák légzőközpontjaira. Figyelembe vették és alkalmazták az 1. csoport B osztályának (CISPR 11) szigorúbb elfogadási határait. A készülék a felsorolt környezetekben való használatra alkalmas, ha közvetlenül a nyilvános táphálózatra csatlakozik.			
b) b) A teszt nem alkalmazható ebben a környezetben, kivéve, ha a használt ME-berendezés és az ME-rendszer, valamint az energiafogyasztás az alapvető EMC-szabványon belül van.			
Útmutató és gyártói nyilatkozat - elektromágneses zavartűrés			
Jelenség	Alapvető EMC szabvány vagy vizsgálati módszer	Állóképességi teszt szintje	
		Orvosi egység környezet	Otthoni környezet
Elektrosztatikus kisülés	IEC 61000-4-2	±8 kV contact, ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aer	
Kisugárzott RF EM mezők	IEC 61000-4-3	a)	10V/m b), 80MHz - 2,7GHz, 80% AM @ 1kHz
Vezeték nélküli kommunikációs eszközök közelségi mezői	IEC 61000-4-3	Összeegyeztethető Megjegyzés: A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések (adók) és a BPM83 között betartandó távolságokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a kézikönyvben található elérhetőségeket. Javasoljuk azonban, hogy az aeroszolos elektromechanikus berendezéseket legalább 0,5 m távolságra helyezték el a mobiltelefonoktól vagy más rádiókommunikációs adóktól az esetleges interferencia minimalizálása érdekében.	
Névleges teljesítményfrekvenciájú mágneses mezők	IEC 61000-4-8	30A/m c) 50/60 Hz	
a) a) A berendezés alkalmas otthoni környezetben és professzionális egészségügyi környezetben való használatra, csak a betegszobákra és a kórházak vagy klinikák légzőközpontjaira. Figyelembe vettek és alkalmaztak szigorúbb ellenállás-elfogadási határokat.			
b) b) A moduláció alkalmazása előtt.			
c) c) Ez a vizsgálati szint legalább 15 cm-es minimális távolságot feltételez az ME-berendezés vagy az ME-rendszer és a teljesítményfrekvenciás mágneses mezők forrásai között.			

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL Bukarest, telefon: +40 21 211 06 52, www.bitonline.ro