

Elektromos fésű LED Vitammy Ufo-val HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a termék használata előtt.

Tartalom

1. Bemutakozás;
2. A használt jelzések magyarázata;
3. Használat előtti óvintézkedések;
4. Akkumulátor megjegyzések;
5. Általános megjegyzések;
6. Hogyan működik;
7. A készülék leírása;
8. A kapcsoló funkciói;
9. Használati utasítás;
10. Hibaelhárítás;
11. Elemcsere;
12. Tisztítás és tárolás;
13. Az Európai Unióban a hazai felhasználók által használt használt berendezések megszüntetése;
14. EMC útmutató – Elektromágneses kompatibilitás.

Bevezetés

A használati és karbantartási utasításokat gondosan be kell tartani a megfelelő működés és a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, hogy elkerülje a nem megfelelő használatból eredő veszélyeket.

A használt jelek magyarázata

A kézikönyvben és a készülék házán esetlegesen megjelenő figyelmeztető táblák és szimbólumok fontosak a vásárolt berendezés biztonságos használatának biztosítása érdekében. Jelentésüket az alábbi táblázat mutatja be:

	Olvasd el az utasításokat
---	---------------------------

	Óvatos!
	BF típusú érzékelő
	Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban.
	Termelő
	A használt berendezéseket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A készüléket nem szabad más kommunális hulladékkal együtt kidobni. Az eszközt a használt elektronikai és elektromos berendezések számára fenntartott speciális tartályba kell dobni, vagy vissza kell vinni egy olyan boltba, ahol hasonló berendezéseket vásárolhat. A felhasználó felelős a berendezés megfelelő ártalmatlanításáért. Megfelelő kiselejtezés esetén a készülék újrahasznosítható, így elkerülhető a környezetre és az egészségre gyakorolt negatív hatás.
	Védje a nedvességtől.
	A 93/42/EGK MDD irányelv és az azt követő módosítások szerinti CE orvosi jelzéssel ellátott jelölés.

Óvintézkedések használat előtt

Mottónk a termékek folyamatos fejlesztése, ezért a dobozon belüli tényleges termék és a dobozon kívüli fotók között kis eltérések lehetnek.

Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.

Megjegyzések az akkumulátorról

Az elemeket nem szabad gyermekektől távol tartani, mert lenyelésük mérgezést és/vagy egyéb súlyos egészség- és életveszélyt okozhat.

Dobja ki az elemeket, amint lemerültek, gyermekektől és közvetlen hőtől távol tartva.

Az akkumulátorok mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek veszélyt jelentenek az egészségre és a környezetre. Az elemeket mindig a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra. Soha ne dobja az akkumulátort a normál háztartási szemétkébe.

Cserélje ki az elemeket újakra, amelyek kompatibilisek az ebben a kézikönyvben javasolt típussal (AAA).

Ne használjon újratölthető elemeket, mert gyengébb minőségűek lehetnek, és előfordulhat, hogy nem tartanak elég sokáig. Az akkumulátor használata károsíthatja a készüléket.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort – a kifolyó elem károsíthatja a készüléket. Ha elemszivárgást észlel, viseljen védőkesztyűt, vegye ki az akkumulátort, és száraz ruhával tisztítsa meg a készüléket.

Általános megjegyzések

- A Vitammy Ufo-t csak a tetvek elleni küzdelemben szabad használni. A fejtetvek, a testtetvek és az intim területek közötti különbségek miatt ne használja a Vitammy Ufo-t, kivéve a fejbőr haját.
- Ne használja ezt a fésűt háziállatokon.
- Ne érintse meg ujjával a fésű fémfogait, amíg a készülék be van kapcsolva.
- Ne merítse a készüléket semmilyen folyadékba.
- Soha ne tegye a készüléket a szájba vagy a test bármely más részére.
- Epilepsziás vagy szívbetegségben szenvedő betegeknél nem alkalmazható.
- A Vitammy Ufo megzavarhatja az elektronikus orvosi eszközök működését.
- Néhány érzékeny személy enyhe bizsergő érzést tapasztalhat a készülék működése közben – nincs áramütés veszélye.
- A Vitammy Ufo-t gyermekeknél csak felnőttek használhatják.
- Óvja a készüléket az esésektől és az erős ütésektől.
- A Vitammy Ufo nem működik nagyon zsíros hajon.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen időjárási hatásoknak (eső, napsütés stb.).
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
- A készüléket és annak bármely alkatrészét a felhasználó nem javíthatja.
- Ha a készülék megsérült és nem működik megfelelően, kapcsolja ki, és forduljon a szervizközponthoz.
- Ne módosítsa a készüléket a gyártó beleegyezése nélkül! A gyártó, az eladó és a forgalmazó csak akkor felelős a berendezés biztonságáért és megfelelő működéséért, ha:
 - a) Az utasításoknak megfelelően használják;
 - b) Az inhalátort használó elektromos berendezés paraméterei megfelelnek a vonatkozó előírásoknak.
- Ne használja a készüléket, amíg a beteg alszik.

Hogyan működik

Miközben pipettázza a fej száraz haját, a készülék kis elektromos töltést küld a fésű fémfogaira. Amikor a fésű érintkezésbe kerül egy felnőtt tetűvel, az elektromos töltés elpusztítja a tetveket.

A narancssárga tetűészlelő riasztó lámpa kigyullad, ha egy tetűt észlel, elpusztít és a fésűbe fogott. Távolítsa el az elhullott tetveket (a lámpa kialszik), és folytassa a fésülést.


Vitammy Ufo megöli a kifejlett tetveket. Segít eltávolítani a szőrszálakat is, de nem pusztítja el a tojásokat, amelyek egy része a hajhoz tapadhat.

A kupak egy beépített nagytöltőt és egy kefét tartalmaz a fésű tisztításához.

Készülék leírása


A Vitammy Ufo fémfésűt használ, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden tetűt kiirtottak.

A készülék használata 16 napon keresztül 2-3 naponta javasolt.

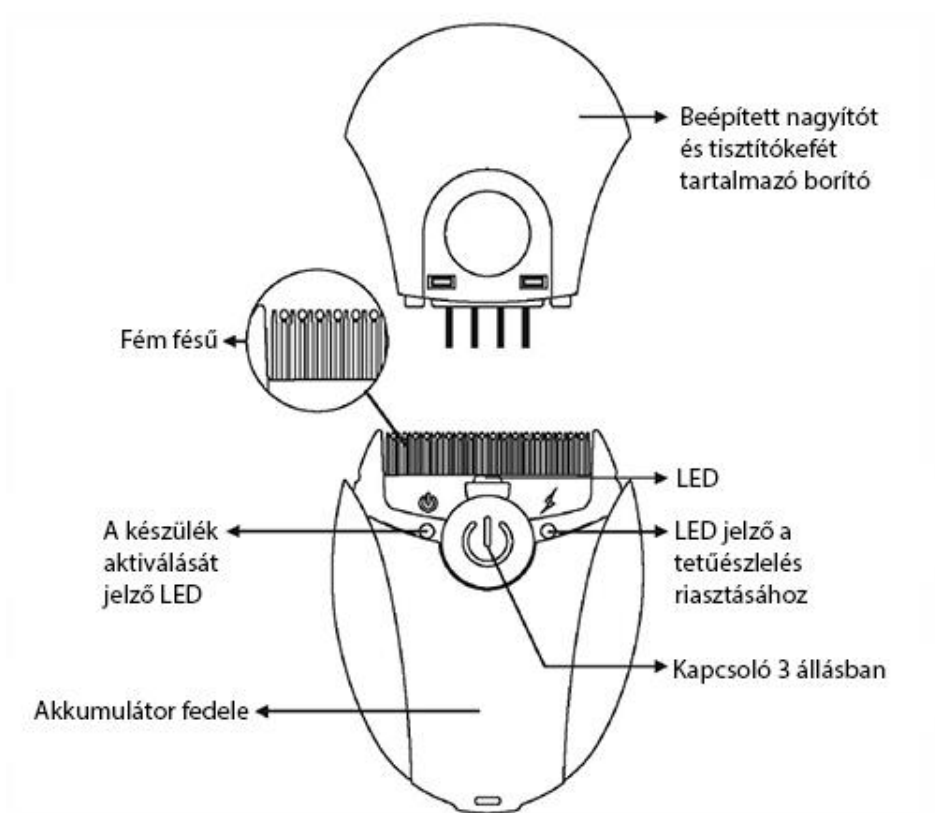


Kapcsoló funkciók

1. Kapcsolja a készletet egészen a készülék hátuljáig – készülék ki, LED ki.

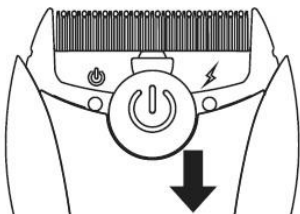

2. A kapcsoló középső helyzetbe állítása – a készülék egy másodpercre világít a narancssárga tetűészlelési figyelmeztető LED-del, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttségi szintjét ellenőrizte. Ha az akkumulátor töltöttsége elegendő, a riasztás leáll, és a zöld jelzőfény kigyullad, és a készülék használatra kész.

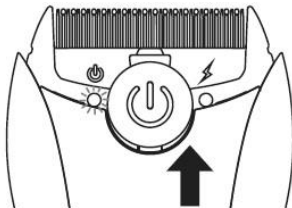

3. A fésűig beállított kapcsoló - aktiválja a LED lámpát, amely segít a tetvek megtalálásában.




Használati útmutató

Használat előtt a hajnak száraznak kell lennie. A fésűt nem szabad samponokkal vagy bármilyen más tetűpusztító szerrel együtt használni.


Az optimális eredmény érdekében a hajnak tisztának kell lennie, és nem kell formázó termékekkel, például zselével vagy hajhabbal bevonnia.

Használat előtt fésűvel vagy közönséges kefével fésülje meg a haját, hogy a haj ne gabalyodjon össze - ez megkönnyíti a fésű működését. Fogai szándékosan egymáshoz közel helyezkednek el, és könnyen beszorulhatnak.


1. Távolítsa el a fedelet, majd állítsa a kapcsolót középső állásba - a készülék ellenőrzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, majd a zöld LED világít.

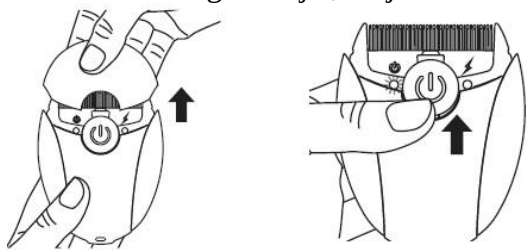

2. Mozgassa előre a kapcsolót az erős LED-lámpa bekapcsolásához.

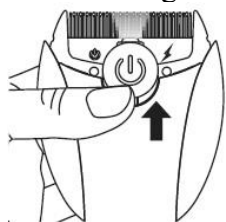

3. Tartsa a fésűt 45°-os szögben, és fésülje meg a haját a tövéhez közel. A LED lámpa segít látni a tetveket olyan helyeken, ahol nincs elég fény, vagy sötét hajú embereknél.

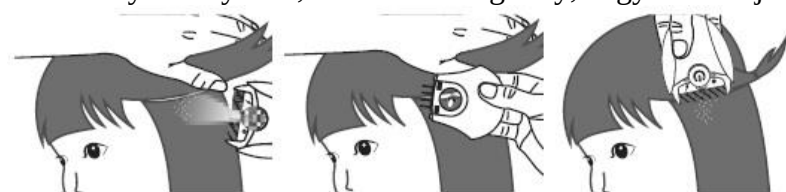

4. Amikor a készülék elpusztítja a tetveket, a lámpa kigyullad.
5. Távolítsa el az elhullott tetveket a kupakba épített kefével (a lámpa kialszik), és folytassa a fésülést.

Hibaelhárítás


Tünet	Lehetséges ok	Megoldás
A narancssárga fény nem alszik ki	A fésű piszkos	Tisztítsa meg a fésűt
A narancssárga lámpa villog	Lemerült akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort
	A fésű piszkos	Tisztítsa meg a fésűt

A tetű elkapott, de a lámpa nem alszik ki	A tetű túl kicsi	A tetű meghalt, folytassa a kezelést
---	------------------	--------------------------------------

Ha a fenti feltételek ellenőrzése után az eszköz továbbra sem vagy nem megfelelően működik, forduljon az eladó szervizközpontjához.


Az akkumulátor cseréje

A Vitammy Ufo AAA elemmel működik. Az akkumulátor cseréjéhez nyissa ki az akkumulátorfedelelet, majd vegye ki az akkumulátort. Helyezze be az új elemet az elemtartóban jelzett polaritásnak megfelelően. Vegye ki az akkumulátort a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja – ezzel elkerülheti az akkumulátor lemerülését és a készülék esetleges károsodását.

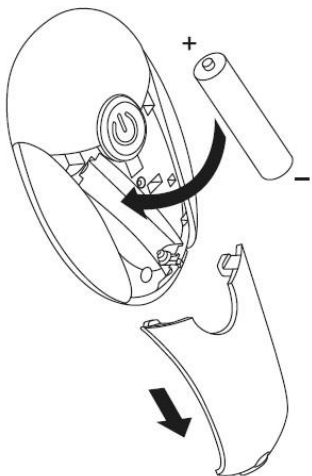

Tisztítás és tárolás

A készülék fémfésűje a készülék burkolatába épített kefével tisztítható. Erősebb szennyeződés esetén használhatunk alkohollal átitatott pamutot.

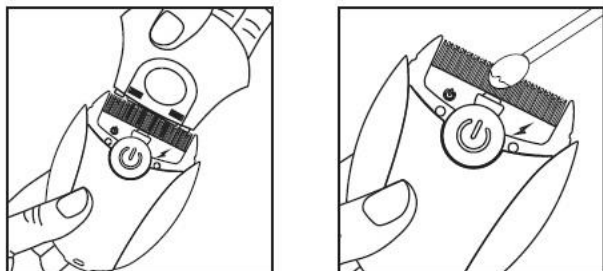

Ne nyomja túl erősen - helyrehozhatatlanul károsíthatja a készüléket.

Használaton kívül tartsa biztonságos helyen a készüléket. Kerülje a magas hőmérsékletet és a közvetlen napfényt.

A berendezés hulladékának háztartási felhasználók általi ártalmatlanítása az Európai Unióban

Ez a termék nem dobható ki ugyanúgy, mint a háztartási hulladék. Ezért Ön felelős a használt berendezések ártalmatlanításáért, és köteles azokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak feljogosított újrahasznosítási helyére szállítani.

A berendezések hulladékainak válogatása, megsemmisítése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet tiszteletben

tartásának elveivel összhangban történjen. Ha további információra van szüksége a használt berendezések gyűjtőhelyeiről, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz.

EMC útmutató – Elektromágneses kompatibilitás

Ez az eszköz megfelel a jelenlegi elektromágneses kompatibilitási követelményeknek. Az elektromos orvosi berendezések különleges gondosságot igényelnek az EMC-követelményeknek megfelelő telepítés és használat során. Ezért szükséges, hogy az eszközt a gyártó által megadott előírásoknak megfelelően telepítsék és használják. Fennáll az elektromágneses interferencia veszélye más eszközökkel, különösen az elemző és feldolgozó eszközökkel. Ezenkívül FM rádió vagy rádiós kommunikációs eszközök (mobiltelefonok, vezeték nélküli hálózatok) esetén elektromágneses interferencia léphet fel.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül műszaki és funkcionális változtatásokat vezessen be a terméken.

Megjegyzés: ezt az eszközt manuálisan tesztelték, és bizonyítottan biztosítja a megfelelő működést.

A termék CE minősítéssel rendelkezik.

Immunitási teszt	Teszt szint IEC 60601	Megfelelőségi szint	Elektromágneses környezet – útmutató
Elektrosztatikus kisülés IEC 61000-4-2	±6kV érintkező ±8kV levegő	±6kV érintkező ±8kV levegő	A padlóknak fából, betonból vagy kerámialapokból kell készülniük. Ha a padlót szintetikus anyag borítja, a relatív páratartalomnak legalább 30%-nak kell lennie.

GARANCIA FELTÉTELEI

1. A kompresszoros aeroszolos gép garanciája a vásárlástól számított 24 hónap.
2. A jótállási feltételeket a vevővel a jótállási jegyen közöljük.
3. A jótállás érvényesítéséhez a jótállási jegy bemutatása szükséges.
4. A tartozékok megrendelhetők az importőrtől, a www.bitonline.ro weboldalon

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL, Bukarest, telefon: +40212110652, www.bitonline.ro