

BodyFit masszázstasztal



Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	3
2	A Body Fit masszázstalok rendeltetése	3
3	Biztonsági óvintézkedések	3
4	A BodyFit masszázstalok felállítása.....	4
5	A masszázstal és tartozékai.....	4
6	A páciens elhelyezése	6
7	Tárolási feltételek és karbantartás	7
8	Méretábrázat.....	9

1. Bevezetés

Gratulálunk a kiváló választáshoz, és köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával. A termék használatának megkezdése előtt kérjük, szánjon időt a használati útmutató figyelmes elolvasására.

A 4 RÉSZES BODYFIT MASSZÁZSASZTAL teljesen vízszintes helyzetbe állítható, a lábész megemelhető, valamint az asztal szék/fotel pozícióba is állítható.

A 3 RÉSZES BODYFIT MASSZÁZSASZTAL teljesen vízszintes helyzetbe állítható, valamint a lábész megemelhető.

A 2 RÉSZES BODYFIT MASSZÁZSASZTAL teljesen vízszintes helyzetbe állítható.

A BodyFit masszázstasztal a legnagyobb gondossággal, kiváló minőségű anyagokból, a vonatkozó szabványoknak megfelelően készült. A használati útmutatóban leírt szabályok betartása mellett az asztal hosszú időn keresztül megőrzi minőségét, és megbízhatóan használható.

2. A BodyFit masszázstasztalok rendeltetése

A BodyFit masszázstasztalok mozgásszervi és neurológiai problémákkal küzdő páciensek rehabilitációjára, különféle manuálterápiás kezelések és gyógymasszázs végzésére, valamint kezelések és vizsgálatok elvégzésére szolgálnak.

Az asztalok rehabilitációs és orvosi rendelőben, továbbá ortopédiai, neurológiai és rehabilitációs osztályokon egyaránt használhatók.

3. Biztonsági óvintézkedések

- a)** A masszázstasztalt kizárólag a használati útmutatóban foglalt előírásoknak megfelelően szabad használni.
- b)** Minden használat előtt ellenőrizze az asztal műszaki állapotát. Győződjön meg arról, hogy a csavarok és rögzítőelemek nem lazultak-e meg, a kábelek/hevederek nem sérültek vagy foszlottak-e, valamint a fa- és alumíniumelemeken nincsenek-e repedések vagy egyéb sérülések.
- c)** A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy az asztal stabilan áll, minden lába megfelelően támaszkodik a padlón, és azonos magassági szintre van beállítva.
- d)** Tilos az asztalt a megengedett maximális terhelhetőségen túl terhelni. Az asztal túlterhelése súlyos sérülést okozhat.
- e)** Vizsgálat vagy kezelés közben egyszerre csak egy személy tartózkodhat az asztalon.
- f)** Tilos hirtelen felugrani vagy ráülni az asztalra.
- g)** Javasolt az asztal középső részén ülni vagy feküdni, hogy a testsúly egyenletesen oszoljon el, és elkerülhető legyen az asztal felbillenése.
- h)** Tilos az asztalra állni, valamint a fejtámlára, a megemelt háttámlára, a polcokra vagy a kartámaszokra ülni, térdelni, illetve azokra támaszkodni.
- i)** Az asztalt tilos úgy felemelni, áthelyezni vagy elmozdítani, hogy közben páciens tartózkodik rajta.
- j)** Az asztal kizárólag zárt, száraz helyiségekben történő használatra készült.
- k)** Az asztal kizárólag összecukott állapotban szállítható.

4. A BodyFit masszázstasztalok felállítása

a) Állítsa az asztalt az oldalára úgy, hogy a fogantyú felfelé nézzen. Oldja ki a csatokat, nyissa szét félig az asztal két részét, majd vegye ki a tartozékokat. (1. ábra)

1. ábra



b) Az asztal mögött állva fogja meg a hordozófogantyúkat, majd nyissa szét teljesen az asztal két részét. Az asztal lábai automatikusan kinyílnak. (2. ábra)

2. ábra



c) c) Állítsa az asztalt a lábaira, majd középen enyhén nyomja lefelé, hogy meggyőződjön arról, hogy az asztal stabilan áll és teljesen ki van nyitva. Ha az asztal megemelkedik vagy nem áll stabilan, ellenőrizze, hogy a merevítőkábelek teljesen ki vannak-e egyenesedve.

d) Összecsukás: Az asztal összecsukásához hajtsa végre a felállítás lépéseit fordított sorrendben. Ügyeljen arra, hogy minden tartozék az eredeti helyére kerüljön.

5. A masszázstasztal és tartozékai

A masszázstasztalhoz további tartozékok is tartoznak, amelyek ismertetése a használati útmutató következő részében található. Kérjük, figyelmesen olvassa el a leírásukat, hogy teljes mértékben kihasználhassa a készlet által kínált lehetőségeket.

Fejtámla:

A fejtámla egy félhold alakú tartórészből és egy ugyanilyen formájú párnából áll. Kényelmes és megfelelő alátámasztást biztosít a páciens feje számára.

A maximális kényelem érdekében a fejtámla dőlésszöge és magassága egyaránt állítható. (3. ábra)

3. ábra



Elülső kartámasz:

Ez az állítható kartámasz kényelmes alátámasztást biztosít a páciens karjai és alkarjai számára. Állítsa be a hevederek hosszát az optimális pozíció eléréséhez. (4. ábra)


4. ábra



Állítható háttámla:

Oldja ki a háttámlát rögzítő tépőzárat. A háttámla magasságának beállításával kiválasztható az optimális dőlésszög. A kívánt dőlésszög beállítása után nyomja meg a háttámlát, és győződjön meg arról, hogy a rögzítőmechanizmus megfelelően reteszelődött.

A háttámla vízszintes helyzetbe történő visszaállításához először emelje azt a legmagasabb pozícióba, majd engedje le vízszintes helyzetbe. (5. és 6. ábra)

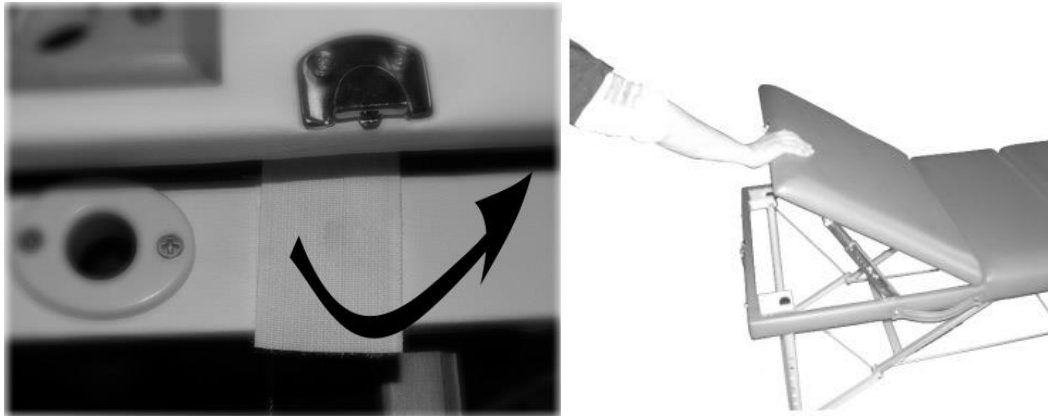

6. A páciens elhelyezése

A páciensnek az asztal középső részére kell leülnie, majd innen fekvő helyzetbe helyezkednie úgy, hogy testsúlya egyenletesen oszoljon el, ezáltal biztosítva az asztal maximális stabilitását.

A munkaterhelés a kezelt személy testsúlyából és a masször által kifejtett nyomóerőből tevődik össze. Például: ha a páciens testsúlya 130 kg, az asztal maximális terhelhetősége pedig 230 kg, akkor a masször által kifejtett terhelés nem haladhatja meg a 100 kg-ot. A ferdén kifejtett terhelés nem haladhatja meg a függőleges irányú terhelés 50%-át.

FIGYELEM! AZ ASZTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGÉT TILOS TÚLLÉPNI!

Az asztal túlterhelése súlyos személyi sérülést és/vagy a termék károsodását okozhatja.

A páciens asztalra történő felhelyezkedését és az asztalról való leszállását a kezelésért felelős személynek kell felügyelnie.

Amennyiben a kezelés során a páciens ruházat nélkül fekszik az asztalon, egyszer használatos higiéniai alátét használata javasolt.

7. Tárolási feltételek és karbantartás

A BodyFit masszázstasztal szállításakor ajánlott a hordtáska használata, hogy megóvja az asztalt a véletlen sérülésektől. Használaton kívül az asztalt száraz, hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen kell tárolni. Ne tegye ki az asztalt szélsőséges hőmérsékletnek (hidegnek vagy melegnek), illetve nedvességnek.

Tisztítás: Minden használat után tisztítsa meg az asztal felületét langyos, szappanos vízzel, majd puha (pamut) törölkendővel törölje szárazra. Az asztal felületének tisztításához ne használjon etil-alkohol alapú tisztítószeret, mert azok károsíthatják az anyagot.

Fertőtlenítés: Amennyiben fertőtlenítés szükséges, használjon izopropanol-alapú, egészségügyi célra készült fertőtlenítőszert, amely vinilfelületeken történő használatra is alkalmas.

Szennyeződések eltávolítása: A kisebb szennyeződések kímélő tisztítószerrel távolíthatók el. Vigye fel a tisztítószert egy száraz, tiszta törölkendőre, majd óvatos dörzsöléssel távolítsa el a szennyeződést. Ezután öblítse le a megtisztított felületet langyos vízzel, és törölje szárazra. A makacsabb szennyeződések eltávolítása professzionális tisztítást igényelhet.

FIGYELEM! Soha ne használjon erős, súroló hatású tisztítószeret vagy agresszív vegyszereket az asztal tisztításához. Az ilyen szerek károsíthatják a kárpitot. Kerülje az olyan tisztító- és fertőtlenítőszer használátát, amelyek nem engedélyezettek vinilfelületeken történő alkalmazásra. Ha nem biztos abban, hogy egy adott készítmény megfelelő-e, ne használja.



Data wydania: 01.12.2013

Autoryzowany przedstawiciel:

SISCOM S.C.
ul. Bysewska 30
80-298 Gdańsk
Tel. 58 677 11 22
sklep@fajne ceny.pl

8. Mérettáblázat

Modell	Hosszúság [cm]	Szélesség[cm]	Magasság [cm]	Méreték összecsukott állapotban	Súly [kg]	Megengedett maximális terhelés[kg]
2 részes alumínium Színváltozatok: 468, 469, 1031, 1032, 1033, 1034	Az asztal hossza: 185 cm Az asztal hossza fejtámlával: 212 cm	Szélesség: 60 cm Szélesség kartámaszokkal: 81 cm	Állítható magasság: 66–88 cm	95cm x 63cm x 20cm	Az asztal tömege: 10,5 kg Tömeg tartozékokkal: 12 kg	250kg/900kg statikus terhelés
3 részes alumínium Színváltozatok: 598, 599, 1035, 1036, 1037, 1038	Az asztal hossza: 185 cm Az asztal hossza fejtámlával: 212 cm	Szélesség: 60 cm Szélesség kartámaszokkal: 81 cm	Állítható magasság: 66–88 cm	95 cm x 63 cm x 20 cm	Az asztal tömege: 12,5 kg Tömeg tartozékokkal: 14 kg	250kg/900kg statikus terhelés
2 részes alumínium Színváltozatok: 459, 460, 461, 467, 518, 1040, 1041, 1042	Az asztal hossza: 185 cm Az asztal hossza fejtámlával: 212 cm	Szélesség: 60 cm Szélesség kartámaszokkal: 81 cm	Állítható magasság: 62 – 84 cm	95 cm x 63 cm x 20 cm	Az asztal tömege: 12 kg Tömeg tartozékokkal: 13,8 kg	250kg/900kg statikus terhelés
2 részes fa XXL Színváltozatok: 578, 579	Az asztal hossza: 195 cm Az asztal hossza fejtámlával: 222 cm	Szélesség: 70 cm Szélesség kartámaszokkal: 94,5 cm	Állítható magasság: 62 – 85 cm	98 cm x 70 cm x 18 cm	Az asztal tömege: 12,5 kg Tömeg tartozékokkal:14,5 kg	250kg/900kg statikus terhelés
3 részes fa XXL Színváltozatok: 580, 581	Az asztal hossza: 195 cm Az asztal hossza fejtámlával: 222 cm	Szélesség: 70 cm Szélesség kartámaszokkal: 94,5 cm	Állítható magasság: 62 – 85 cm	98 cm x 70 cm x 18 cm	Az asztal tömege: 14,3 kg Tömeg tartozékokkal: 16,5 kg	250kg/900kg statikus terhelés
2 részes alumínium XXL Színváltozatok: 552, 553	Az asztal hossza: 195 cm Az asztal hossza fejtámlával: 222 cm	Szélesség: 70 cm Szélesség kartámaszokkal: 93 cm	Állítható magasság: 66 – 87 cm	98 cm x 70 cm x 18 cm	Az asztal tömege: 11,3 kg Tömeg tartozékokkal:13 kg	250kg/900kg statikus terhelés

3 részes alumínium XXL Színváltozatok: 550, 551	Az asztal hossza: 195 cm Az asztal hossza fejtámlával: 222 cm	Szélesség: 70 cm Szélesség kartámaszokkal: 94,5 cm	Állítható magasság 66 – 87 cm	98 cm x 70 cm x 18 cm	Az asztal tömege: 12,5 kg Tömeg tartozékokkal 14,2 kg	250kg/900kg statikus terhelés
3 részes fa Színváltozatok: 455, 456, 457, 458, 500, 1027, 1028, 1029, 1030	Az asztal hossza: 185 cm Az asztal hossza fejtámlával: 212 cm	Szélesség:60 cm Szélesség kartámaszokkal: 81 cm	Állítható magasság 62 – 84 cm	95 cm x 63 cm x 18 cm	Az asztal tömege: 14 kg Az asztal tömege: 16,5kg	250kg/900kg statikus terhelés
4 részes fa Színváltozatok: 642, 643, 1043, 1044, 1045, 1046	Az asztal hossza: 185 cm Az asztal hossza fejtámlával: 212 cm	Szélesség: 62 cm Szélesség kartámaszokkal: 83 cm	Állítható magasság 59 - 85cm	95 cm x 66 cm x 20 cm	Az asztal tömege: 19,5 kg Az asztal tömege: 21 kg	250kg/900kg statikus terhelés

MASSZÁZSASZTALOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Kérjük, ismerkedjen meg a masszázsszotalok használatára vonatkozó előírásokkal. Az előírások betartása hozzájárul a termék hosszabb élettartamához és biztonságos használatához.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A huzat sérülésének elkerülése érdekében a terméket óvatosan csomagolja ki, és ne használjon éles eszközöket a csomagolás felbontásához.
- Az asztal átvételekor kérjük, alaposan ellenőrizze, hogy a műbőr felületén nincsenek-e karcolások, kopások, repedések, vágások vagy egyéb sérülések, továbbá ellenőrizze a fa szerkezeti elemek épségét is. Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a termék hiánytalan, és a megrendelésnek megfelelő kivitelben került leszállításra.
- A használat megkezdése előtt az asztalt vízszintes, egyenletes felületen kell elhelyezni, és gondoskodni kell annak megfelelő stabilitásáról.
- A mozgó alkatrészek bármilyen rendellenes vagy kétséges működését haladéktalanul jelezni kell az eladónak.
- Fontos, hogy a termék használatára és tárolására szolgáló helyiségben megfelelő környezeti feltételeket biztosítson: a hőmérséklet $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$, a relatív páratartalom pedig 40% és 70% között legyen. A termék és a működő hőforrások közötti távolság legalább 1,5 méter legyen. A műbőr kifakulásának elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket közvetlen napsugárzásnak.

A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT SZABÁLYAI

A terméket óvni kell a mechanikai sérülésektől. A kartámaszokra ülni szigorúan tilos.

A faelemek, például az asztallábak színe eltérhet a termékfotókon látható árnyalattól.

Ez a fa szerkezetének, erezetének és természetes színváltozatainak köszönhető tulajdonság. Emiatt a pácolás árnyalatában is előfordulhatnak eltérések, különösen akkor, ha egy meglévő garnitúrához később további terméket rendelnek.

További termékek utólagos rendelése esetén a műbőr kárpit árnyalatában is előfordulhatnak eltérések.

A világos színű műbőrrel kárpitozott asztalok felületét más textíliák, különösen ruházati anyagok (például farmeranyag) elszínezhetik. Az ilyen elszíneződés a ruházati anyag festékének átadásából ered, és nem a kárpit hibája.

A termék garanciális időszak alatti cseréje esetén a gyártó fenntartja a jogot technológiai módosítások bevezetésére, beleértve a termék méreteinek, a gyártáshoz használt anyagoknak, valamint a díszítő- és mozgóelemeknek a megváltoztatását, amennyiben ez a termék hibáinak kiküszöbölése érdekében szükséges.

A kínálatunkban feltüntetett méretek centiméterben értendők, és a tényleges méretektől legfeljebb 3%-kal eltérhetnek.

A MŰBŐR KÁRPITOZÁSÚ ASZTALOK MEGFELELŐ ÁPOLÁSÁNAK SZABÁLYAI

- A műbőr kiváló rugalmassága, valamint nagy szakító- és tépésállósága ellenére védelmet igényel az olyan károsító tényezőkkel szemben, mint az izzadság (amely sót tartalmaz), a haj zsírossága, a por, a háztartási vegyszerek és a kiszáradás.
- Különféle olajok vagy krémek használatakor az asztalt minden esetben erre a célra szolgáló textillepedővel kell védeni.
- A megfelelő ápolás segít megőrizni a műbőr eredeti minőségét, és hozzájárul ahhoz, hogy az asztal még többéves használat után is megőrizze újszerű állapotát.
- A műbőrrel kárpitozott asztalok egyik jelentős előnye, hogy könnyen tisztíthatók. A legtöbb esetben elegendő a felületet nedves törlőkendővel áttörölni, vegyi tisztítószer használata nélkül.
- A műbőr típusától és igénybevételének mértékétől függően 4–6 havonta ajánlott a kárpit tisztítása és ápolása.
- Az első ápoló kezelést célszerű közvetlenül a termék megvásárlása után elvégezni. Ez megkönnyíti a későbbi tisztítást, és segíthet megelőzni a nehezen eltávolítható szennyeződések kialakulását.

A kárpitozott bútorok használati útmutatója röviden



Az asztal mozgatasakor minden karpitozott elemet vedeni kell a mechanikai serulesektol.

Kicsomagolaskor tilos eles vagy veszelyes eszkozokat hasznalni.

Az asztal mozgatasakor kizarolag a stabil, rogzített szerkezeti elemeknél fogva emelje és szállítsa a terméket.

Az asztalokat kizarolag rendeltetésüknek megfeleloen szabad hasznalni.

Az asztalokat vedeni kell a káros időjárási és környezeti hatásoktól.

Az asztalokat a fűtőtestektől legalább 1 méter távolságra kell elhelyezni.

A kartámaszokra ülni tilos.

Tilos az asztal olyan részeit nagy terhelésnek kitenni, amelyek nem erre a célra készültek.

Az asztalokat 15–30 °C közötti hőmérsékletű és 40–70% relatív páratartalmú helyiségben kell tárolni.

FIGYELEM!

Indokolatlan szervizkihívás esetén, illetve amennyiben megállapítást nyer, hogy a meghibásodás a Vásárló hibájából keletkezett, a Garanciovállaló fenntartja a jogot a felmerült költségek Vásárlóra történő áthárítására.

A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

- A vásárláskor látható hibákra, sérülésekre, valamint az alkatrészek és tartozékok észlelhető mennyiségi hiányára.
- A nem rendeltetésszerű, illetve a használati, tárolási és karbantartási előírásokkal ellentétes használatból eredő károkra.
- A váz, a szerkezeti elemek vagy a műbőr kárpit Vásárló hibájából bekövetkezett mechanikai sérüléseire.
- A bútor Vásárló által vagy a Vásárló megbízásából, a Garanciovállaló engedélye nélkül végzett javításából vagy átalakításából eredő károkra.
- Állatok által okozott károkra és meghibásodásokra.
- A bútor vízzel vagy más folyadékkal történő eláztatásából eredő károkra. Különösen veszélyesek a vegyi oldatok, színezőanyagok és testápolási készítmények.
- A bútor tényleges méretei és a katalógusban megadott méretek közötti ± 3 cm-es eltérésekre.
- A műbőr kárpit ruházat vagy más színezőanyag által okozott elszíneződésére.
- Azokra a hibákra és sérülésekre, amelyek miatt a termék vételárát a vásárláskor már csökkentették.

További megjegyzések

Az asztalok műbőr kárpitjának árnyalata a természetes és mesterséges fény beesési szögétől függően eltérőnek tűnhet. Ez nem minősül reklamációra jogosító hibának. Amennyiben egy korábban megvásárolt garnitúrához további asztalokat rendel, figyelembe kell venni, hogy a kárpitanyag árnyalata és felületi struktúrája kis mértékben eltérhet a korábban vásárolt termékétől. Az egyes gyártási tételek között előfordulhatnak ilyen különbségek. A bútorok karbantartásának és ápolásának szabályai

FONTOS!

A biztonság és a termék védelme érdekében az alapos tisztítás megkezdése előtt javasolt egy kevésbé látható helyen próbát végezni annak ellenőrzésére, hogy a műbőr hogyan reagál az alkalmazni kívánt tisztítási eljárásra vagy tisztítószerre.

Faelemek

A faelemekkel rendelkező asztalokat nem ajánlott túl magas páratartalmú helyiségben, illetve fűtőtestek és más közvetlen hőforrások – például kandalló vagy kályha – közelében elhelyezni. A faelemeket rendszeresen portalanítsa tiszta, száraz vagy enyhén nedves törölkendővel. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a fafelületeket, és ne tegye ki azokat erős, közvetlen napsugárzásnak vagy magas hőmérsékletnek. A faelemekkel rendelkező asztalok élettartama meghosszabbítható a kereskedelmi forgalomban kapható, megfelelő faápoló és -karbantartó szerek használatával. Kerülje az erős dörzsölést, valamint a durva vagy kemény anyagok használatát, amelyek megkarcolhatják a felületet.

Műbőr

A műbőr szintetikus, bőrhöz hasonló anyag. Rendszeresen tisztítsa meleg, szappanos vízzel, puha törölkendő vagy szivacs segítségével. Az erősebben szennyezett részeket puha kefével óvatosan tisztítsa meg. Tisztítás után törölje át a felületet tiszta vízzel, majd puha törölkendővel törölje szárazra. A foltokat, valamint a golyóstoll, rúzs, nyomdafesték vagy újságpapír által okozott szennyeződések azonnal távolítsa el egy törölkendővel. Szükség esetén hígított alkoholos oldat is alkalmazható. Ne használjon pasztákat, viaszokat, spray-eket, erős tisztítószereket, oldószereket, oldószertartalmú tisztítószereket, illetve bizonyos, természetes bőr ápolására szolgáló készítményeket. Ezek használata az anyag megkeményedését és repedezését, továbbá a termék felületi színének és fényének megváltozását okozhatja. A műbőrt vasalni tilos. Ne engedje, hogy forró felületekkel, például fűtőtesttel érintkezzen. A műbőrt rendszeresen tisztán kell tartani, és nem szabad hagyni, hogy erősen elszennyeződjön. Fontos, hogy a szennyeződések, a por és egyéb lerakódások ne maradjanak hosszabb ideig az anyag felületén.

FIGYELEM!

- A műbőr kárpit tisztításához semmilyen körülmények között ne használjon olyan vegyszereket, mint például hígító, benzin, alkohol vagy más hasonló szer.
- A faelemek tisztításához és ápolásához ne használjon vegyi alapú spray-eket, aeroszolókat vagy hasonló készítményeket, mivel ezek károsíthatják a faelemek védőbevonatát.
- A kereskedelmi forgalomban kapható általános bútortisztító szerek kizárólag a Vásárló saját felelősségére használhatók.
- A tisztítás során alkalmazott túlzott dörzsölés vagy erős nyomás a felület színének kifakulását, illetve kivilágosodását okozhatja.

GARANCIAJEGY

Termék megnevezése:

Modell/típus:

Értékesítés dátuma (a vásárlást igazoló
bizonylat szerint):

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. A garanciavállaló:

SisCom s.c.

ul. Bysewska 30

80-298 Gdańsk

Tel: + 48 58 677 11 22

E-mail: sklep@fajneceny.pl

serwis@fajneceny.pl

2. A Garanciavállaló a megvásárolt termékre 12 hónap garanciát biztosít.

3. A garanciális időszak azon a napon kezdődik, amikor a Vásárló átveszi a megvásárolt terméket, a vásárlást igazoló bizonylattal és a garanciajeggyel együtt.

4. A Garanciavállaló garántálja a termék megfelelő minőségét és rendeltetésszerű működését.

5. A garancia különösen a feltárt gyártási és anyaghibákra terjed ki, amelyeket a Garanciavállaló díjmentesen köteles kijavítani.

Amennyiben a hiba nem javítható, a Garanciavállaló a hibás alkatrészt lehetőség szerint azonos vagy azzal egyenértékű alkatrészre cseréli.

6. A garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyek nem gyártási vagy anyaghibából erednek, különösen: a használat során természetes módon elhasználódó alkatrészekre, véletlenszerű események következményeire, a használati útmutatóval ellentétes használatból, nem megfelelő tárolásból, illetve a termék karbantartásának elmulasztásából eredő károkra.

7. A garancia nem terjed ki továbbá: a nem az Eladó által végzett, kiegészítő elemek szakszerűtlen felszereléséből eredő károkra; a nem megfelelő, különösen a rendeltetéstől eltérő használatból eredő meghibásodásokra; balesetek következményeire; szerkezeti átalakításból, átalakítási vagy módosítási kísérletekből eredő károkra; a Vásárló gondatlanságából, különösen a használati útmutatóban és a Garanciavállaló ajánlásaiban foglaltak be nem tartásából eredő károkra; a szállítás során keletkezett sérülésekre; a rendeltetésszerű használatból eredő természetes elhasználódásra; a javítással összefüggő kötbérekre vagy kártérítési igényekre; a helyettesítő termékek használatának költségeire; valamint a feltárt hibák következtében elmaradt haszonra.

8. A Vásárló köteles a hibát annak észlelésétől számított 14 napon belül bejelenteni. Amennyiben a hibát a megadott határidőn belül nem jelenti be, a Vásárló elveszítheti a további garanciális igényérvényesítés jogát. A hibás termék további használata további károsodást okozhat, valamint baleset-, sérülés- vagy akár életveszéllyel járhat. A Garanciavállaló nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy a Vásárló a hibás terméket tovább használja.

9. A Vásárló a garanciális igényt közvetlenül a Garanciavállalónál jelenti be. A reklamált termék Garanciavállaló által megjelölt helyre történő eljuttatásának költsége a Vásárlót terheli. Jogos reklamáció esetén a termék Vásárlóhoz történő visszaküldésének költségét a Garanciavállaló viseli.

A garanciális igény elbírálásának feltétele, hogy a Vásárló bemutassa az eredeti, jól olvasható vásárlási bizonylatot és a garanciajegyet.

A Garanciavállaló személyesen vagy képviselője útján megvizsgálja a terméket, és dönt a garanciális igény jogosságáról.

Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Garanciavállaló a termék megvizsgálásának napjától számított 30 napon belül kijavítja a hibát, vagy hibátlan terméket biztosít, az alábbi feltételekkel:

- A garanciális teljesítés módjának megválasztása – a hiba kijavítása vagy a termék cseréje – a Garanciavállaló joga.
- A termék cseréjére minden esetben akkor kerül sor, ha azt korábban már két alkalommal javították.
- A javítás során a Garanciavállaló fenntartja a jogot arra, hogy a termék gyártásához eredetileg felhasznált anyagokat más, hasonló minőségű és használati tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal helyettesítse.
- Szerkezeti módosítások bevezetése esetén a Garanciavállaló jogosult a javítást az új technológiának megfelelően elvégezni.

10. Amennyiben a bejelentett garanciális igény megalapozatlannak minősül, a Garanciavállaló a reklamáció kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban ismerteti álláspontját, és annak indokolásával együtt megküldi a Vásárlónak.

A fent meghatározott határidők meghosszabbodhatnak, amennyiben az alkatrészeket a Lengyel Köztársaság területén kívülről kell beszerezni.

A garanciajegy tartalmával kapcsolatos valamennyi jogvitára a lengyel jog irányadó, és azokat a Garanciavállaló székhelye szerint illetékes rendes bíróság bírálja el.

11. A garanciális felelősség megszűnik:

- a termék szerkezetének módosítása esetén;
- az alkatrészek vagy szerkezeti elemek lefestése esetén;
- a garanciajegy vagy a vásárlást igazoló bizonylat elvesztése esetén;
- a termék tulajdonjogának más személyre történő átruházása esetén.

12. A Garanciavállaló tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a terméket fogyasztó részére értékesítették, a fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i lengyel törvény rendelkezéseinek megfelelően jelen garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Vásárlót a termék szerződésszerűségének hiányából eredően megillető jogokat.