


Ismertető a Sziriusz biorezonancia szoftver használatához.

1. Telepítés és regisztráció
2. Frekvencia terápia adatbázis
3. Szervek, csakrák homeopátiás szerek frekvenciái
4. Páciensek kezelése

Telepítés és regisztráció

A szoftver telepítése Sziriusz_install.msi fájl futtatásával végezhető el. A feltelepített szoftver az asztalra kerülő parancsikonnal indítható el. Az első indításnál el kell végezni a szoftver regisztrálását az alábbi ablakon keresztül. A "Kód generálás" gomb megnyomása után kapott kódot kell elküldeni e-mailben vagy weboldalon lévő regisztrációs űrlapon keresztül. A válaszüzenetben fogja megkapni a regisztrációs kódot amit a "Regisztrációs kód megadása" szövegdobozba kell beírni majd megnyomni a "Regisztrálás gombot". Ezután a szoftver a kiválasztott nyelven fog elindulni. A regisztrációs folyamatot a másolásvédelem miatt szükséges elvégezni.

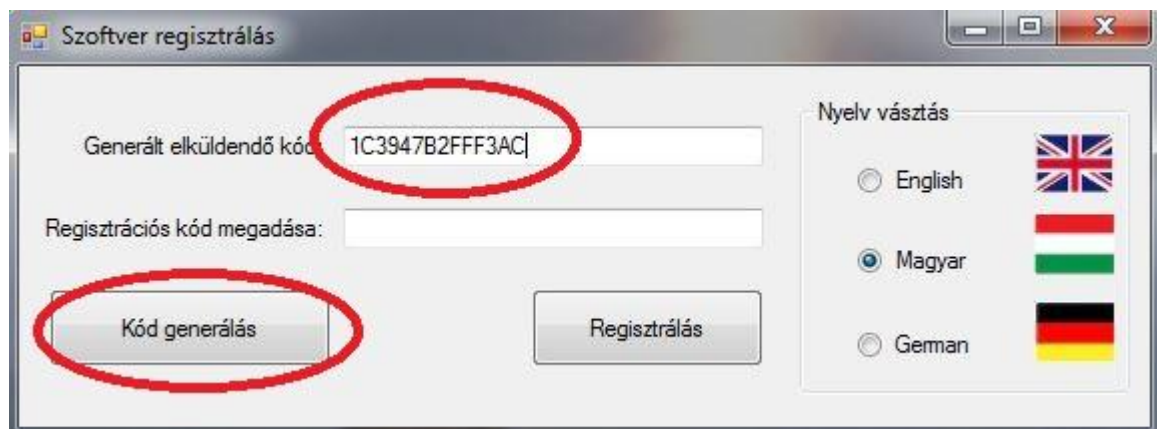


A szoftver licenz egy gépre érvényes, rendszer újratelepítés vagy merevlemez csere esetén a kód változatlan marad!

Főmenü

Ezen az oldalon tudja kiválasztani a szoftver funkcióit.

- Terápia adatbázis
- Frekvenciák generálása
- Páciensek és terápiái
- Kilépés

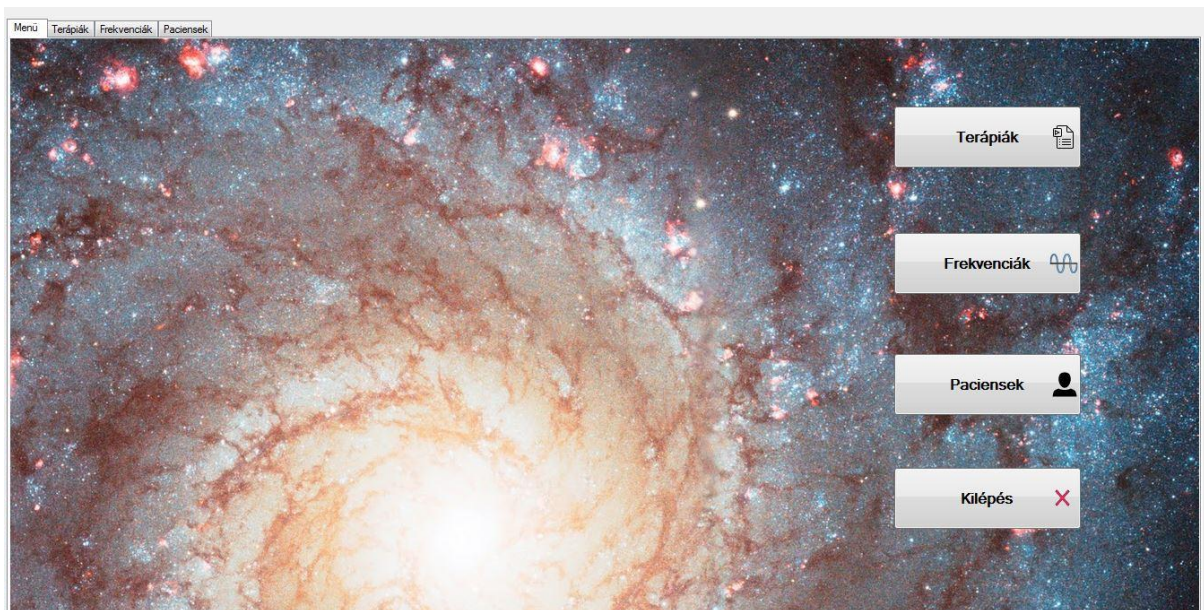

Terápiák

Ezen az oldalon található a frekvencia adatbázis ami Dr.Rife frekvencia sorokat tartalmazza (CAFL adatbázis). A listában található terápiák kiválasztását a táblázat görgetésével vagy a fenti keresőmezőben beírva tudja elvégezni. A kiválasztott terápiát a sorra való klikkeléssel lehet kiválasztani. Ilyenkor a terápiákhoz tartozó frekvenciák a jobb oldali listában láthatók, a kezelés időtartama az oldal alján látható. Ezután a kezelés az "Indítás" gomb megnyomásával indítható. A jobb oldali ablakban látható az aktuálisan generált frekvencia és a kezelésből hátralévő idő. A visszaszámláló lejártakor a kezelés leáll.

Az adatbázis a táblázaton keresztül szerkeszthető, további sor hozzáadható. A módosítás a "Adatbázis mentése" gombbal véglegesíthető. Lehetőség van más forrásból származó adatbázis fájl megnyitására, feltétel a szabványos csv fájl formátum.

Menü

Terápiák

Frekvenciák

Biofeedback

Paciensek

Beállítás

Keresés:

Terápia adatbázis

Adatbázis mentése

Adatbázis megnyitása

File:

Terápia	Frv_1	Frv_2	Frv_3	Frv_4	Frv_5	Frv_6	Frv_7	Frv_8
Arzén_Arsenic_alb_homeopathic_cell_salt	562	0	0	0	0	0	0	0
Asztma_02	1283	1233	44558	0	0	0	0	0
Asztma_Asthma_also_see_Breathing_deep_and...	2720	2170	1800	1600	1500	1283	1233	880
Bazidiomycosis_Basidiomycetes	751	0	0	0	0	0	0	0
Bél gyulladás_Intestinal_inflammation	727	787	880	105	791	0	0	0
Bél probléma vastagbél_intestinal_problems_colon	880	787	727	444	125	95	72	20
Bél probléma_intestinal_problems_general	802	0	0	0	0	0	0	0
Belsőfű betegsége hitelen szédülés s ipolás rövi...	44781	44782	9	0	0	0	0	0
Bevezetés_Euresis_bed_wetting_Use_with_para...	246	800	1550	0	0	0	0	0
Bolha_Flea	2374	0	0	0	0	0	0	0
Borda fájdalom_Costalgia_rib_pain	10000	880	787	727	0	0	0	0
Bordák közötti fájdalom_Intercostal_neuralgia_pa...	3000	1550	880	802	787	776	727	125
Bőrfolyagosodás_Pemphigus	694	893	665	0	0	0	0	0
Bőrkútság_bárányhimő_Hives	1800	880	787	727	522	146	44660	0
Bubópestis_Bubonic_plague	500	333	210	216	0	0	0	0
BX_Virus	2128	3713	0	0	0	0	0	0
Cancer_általános_sarcoma_general	1755	2008	3524	0	0	0	0	0
Cancer_carcinoma_tüdőrák_bronchial	462	776	852	1582	2104	2144	2184	3672
Cancer_cellagejejes agydegenat_astrocytoma_c...	857	44823	44798	7,69	2170	543	641	2127
Cancer_fájdalom_nain	3000	880	7177	3008	777	690	666	0

Hátralévő idő:

00:14:53

Aktuális frekvencia (Hz.):

727

Terápia:

Bél gyulladás_Intestinal_inflammation

Terápia időtartama: 15 min.

Jelerősség:

Hullámforma:

Négyzet

Indítás

Leállítás

Idő/Hz.: 3 perc.

Frekvenciák

A frekvenciák oldalon a rezgések visszaállítására és manuálisan megadott frekvenciák generálására van lehetőség. A Szervek/csakrák/Homeopátiás szerek ablakban a jelölő gombok kiválasztásával vagy a táblázat sorára kattintva tudja kiválasztani a kívánt opciót. Ilyenkor a kiválasztott kép látható. A "Start" gomb megnyomásával indítható a frekvencia generálás, ami az időtartam ablakban megadott ideig fog tartani. A jobb oldali ablakokban manuálisan megadott frekvencia, valamint két megadott frekvencia érték közötti "söprés" végezhető el.

Menü

Terápiák

Frekvenciák

Paciensek

Szervek / Csakrák / Homeopátiás szerek

Szervek

- Agy
- Tüdő
- Epehólyag
- Gyomor
- Bél
- Emésztő rendszer
- Hasnyálmirigy
- Máj
- Vese
- Mellékvese
- Hugyhólyag
- Vér
- Izom
- Csont
- Zsírejt

Csakrák

- Korona Csakra
- Homlok Csakra 3 szem
- Torok Csakra
- Szív Csakra
- Napfonat (Solar plexus) Csakra
- Szakrális (sex) Csakra
- Gyökér Csakra

Homeopátiás szerek

Homeopátiás szer	Érték
Achyranthes Calea	4561
Acidum Butyricum	5864
Acidum Hippuricum	1363
Acidum Saccolact...	2212
Acidum Sulfurosum	1101
Aconitum	5378
Aconitum Camma...	3403
Aconitum Ferax	4621
Aconitum Lycod...	5115
Aconitum Napellus	2557
Actaea Racemosa	1231
Actaea Spicata	1238
Adhesions	6011
Adonidin	8188
Adonis Vernalis	1411

Keresés:

Hullámforma:

Színusz

Jelerősség:

Start

Leállítás

Hertz: 2212

Időtartam (perc): 3

Hátralévő idő:

Manuális frekvencia generálás

Frekvencia:

0

Hullámforma:

Színusz

Időtartam(perc):

0

Viszszámoló:

0

Generálás

Leállítás

Jelerősség:

Söprés (Sweep) funkció

Söprés indítása:

0

Söprés vége:

0

Söprés period (sec.):

0

Söprés indítása

Leállítás

Frekvencia keresés:

Keres

Clear list

Szoftver tulajdonságai

- Dr. Rife (CAFL) adatbázis (Magyar, Angol és Német nyelven).
- Szervek frekvenciái.
- Csakrák, energiaközpontok frekvenciái.
- Homeopátiás szerek adatbázisa
- Manuális frekvencia beviteli lehetőség.
- Söprés funkció (Sweep) két megadott érték közötti frekvencia generálás.
- Páciensek nyilvántartása, személyre szabott frekvenciasorok összeállítása.
- Adatbázis szerkeszthetősége.
- Terápia adatbázis és páciens frekvencia fájlok betöltése más forrásból. ("csv" formátumban).
- Frekvencia jelalakok: Szinusz, Négyszög, Háromszög, Fűrészfog.
- Frekvencia tartomány: 1-20.000 Hertz között.
- Telepítésnél választható nyelvek: Magyar, Angol és Német.

Figyelmeztetés!

A szoftver nem minősül gyógyászati eszköznek!

Diagnosztizálásra nem alkalmas!

A Sziriusz szoftver kifejezetten kísérletezési céllal készült!

A szoftvert mindenki csak saját felelősségére használhatja!