


# Ismertető a Sziriusz biorezonancia és biofeedback szoftver használatához.

1. Telepítés és regisztráció
2. Frekvencia terápia adatbázis
3. Szervek, csakrák homeopátiás szerek frekvenciái
4. Páciensek kezelése
5. Frekvenciás testelemzés (Biofeedback funkció).
6. Beállítások

## Telepítés és regisztráció

A szoftver telepítése Sziriusz\_install.exe fájl futtatásával végezhető el. A feltelepített szoftver az asztalra kerülő parancsikonnal indítható el. Az első indításkor el kell végezni a szoftver regisztrálását az alábbi ablakon keresztül. A "Kód generálás" gomb megnyomása után kapott kódot kell elküldeni e-mailben vagy weboldalon lévő regisztrációs űrlapon keresztül. A válaszúzenetben fogja megkapni a regisztrációs kódot amit a "Regisztrációs kód megadása" szövegmezőbe kell beírni, majd megnyomni a "Regisztrálás" gombot". Ezután a szoftver a kiválasztott nyelven fog elindulni. A regisztrációs folyamatot a másolásvédelem miatt szükséges elvégezni.

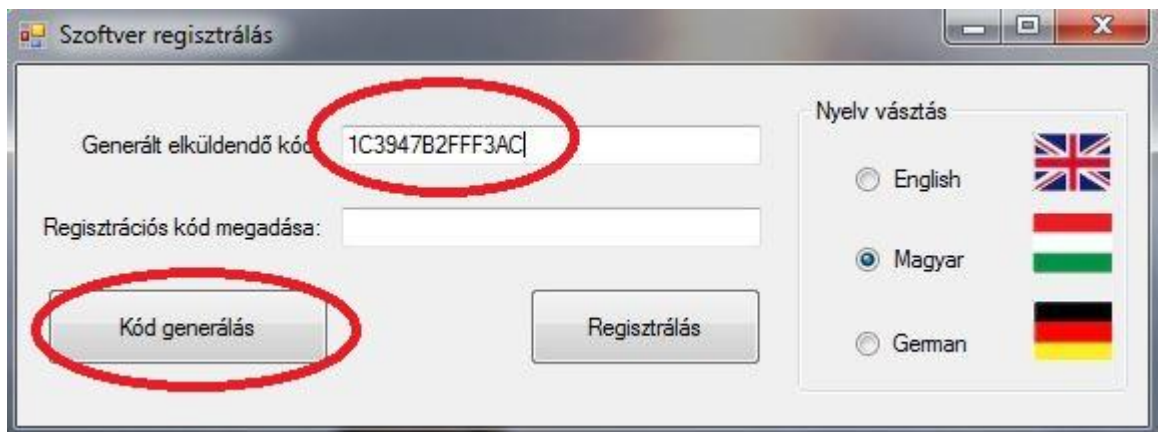


A szoftver licenz egy gépre érvényes, rendszer újratelepítés vagy merevlemez csere esetén a kód változatlan marad!

## Főmenü

Ezen az oldalon tudja kiválasztani a szoftver funkcióit.

- Terápia adatbázis
- Frekvenciák generálása
- Páciensek és terápiái
- Testelemzés funkció(Biofeedback)
- Beállítások
- Kilépés

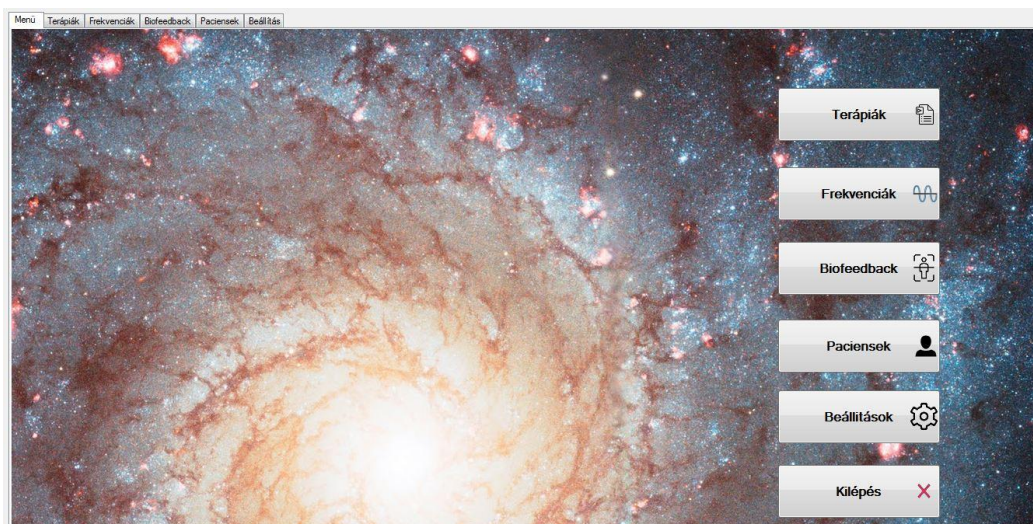

## Terápiák

Ezen az oldalon található a frekvencia adatbázis ami Dr.Rife frekvencia sorokat tartalmazza (CAFL adatbázis). A listában található terápiák kiválasztását a táblázat görgetésével vagy a fenti keresőmezőben beírva tudja elvégezni. A kiválasztott terápiát a sorra való klikkeléssel lehet kiválasztani. Ilyenkor a terápiákhoz tartozó frekvenciák a jobb oldali listában láthatók, a kezelés időtartama az oldal alján látható. Ezután a kezelés az "Indítás" gomb megnyomásával indítható. A jobb oldali ablakban látható az aktuálisan generált frekvencia és a kezelésből hátralévő idő. A visszaszámláló lejártakor a kezelés leáll.

Az adatbázis a táblázaton keresztül szerkeszthető, további sor hozzáadható. A módosítás a "Adatbázis mentése" gombbal véglegesíthető. Lehetőség van más forrásból származó adatbázis fájl megnyitására, feltétel a szabványos csv fájl formátum.

Menü

Terápiák

Frekvenciák

Biofeedback

Paciensek

Beállítás

Keresés:

Terápia adatbázis

Adatbázis mentése

Adatbázis megnyitása

File:

| Terápia                                              | Frv_1 | Frv_2 | Frv_3 | Frv_4 | Frv_5 | Frv_6 | Frv_7 | Frv_8 |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arzén_Arsenic_alb_homeopathic_cell_salt              | 562   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Asztma_02                                            | 1283  | 1233  | 44558 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Asztma_Asthma_also_see_Breathing_deep_and...         | 2720  | 2170  | 1800  | 1600  | 1500  | 1283  | 1233  | 880   |
| Bazillumos gombák_Basidiomycetes                     | 751   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Bél gyulladás_Intestines_inflammation                | 727   | 787   | 880   | 105   | 791   | 0     | 0     | 0     |
| Bél probléma vastagbél_Intestinal_problems_colon     | 880   | 787   | 727   | 444   | 125   | 95    | 72    | 20    |
| Bél probléma_intestinal_problems_general             | 802   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Beledfűl betegsége hitelen szédülés s ipolás rövi... | 44781 | 44782 | 9     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Bevizelés_Eruresis_bed_wetting_Use_with_para...      | 246   | 800   | 1550  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Bolha_Flea                                           | 2374  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Borda fájdalom_Costalgia_rib_pain                    | 10000 | 880   | 787   | 727   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Bordák közötti fájdalom_Intercostal_neuralgia_pa...  | 3000  | 1550  | 880   | 802   | 787   | 776   | 727   | 125   |
| Bőrfolyagosodás_Pemphigus                            | 694   | 893   | 665   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Bőrkútság_bárányhimő_Hives                           | 1800  | 880   | 787   | 727   | 522   | 146   | 44660 | 0     |
| Bubópestis_Bubonic_plague                            | 500   | 333   | 210   | 216   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| BX_Virus                                             | 2128  | 3713  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Cancer_általános_sarcoma_general                     | 1755  | 2008  | 3524  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Cancer_carcinoma_tüdőrák_bronchial                   | 462   | 776   | 852   | 1582  | 2104  | 2144  | 2184  | 3672  |
| Cancer_cellagejees agydeganar_astrocytoma_c...       | 857   | 44823 | 44798 | 7,69  | 2170  | 543   | 641   | 2127  |
| Cancer_fájdalom_nain                                 | 3000  | 880   | 7177  | 3008  | 777   | 690   | 666   | 0     |

Hátralévő idő:

00:14:53

Aktuális frekvencia (Hz.):

727

Terápia:

Bél gyulladás\_Intestines\_inflammation

Terápia időtartama: 15 min.

Jelerősség:

Hullámforma:

Négyzet

Indítás

Leállítás

Idő/Hz.: 3 perc.

## Frekvenciák

A frekvenciák oldalon a rezgések visszaállítására és manuálisan megadott frekvenciák generálására van lehetőség. A Szervek/csakrák/Homeopátiás szerek ablakban a jelölő gombok kiválasztásával vagy a táblázat sorára kattintva tudja kiválasztani a kívánt opciót. Ilyenkor a kiválasztott kép látható. A “Start” gomb megnyomásával indítható a frekvencia generálás, ami az időtartam ablakban megadott ideig fog tartani. A jobb oldali ablakokban manuálisan megadott frekvencia, valamint két megadott frekvencia érték közötti “söprés” végezhető el.

Menü

Terápiák

Frekvenciák

Paciensek

Biofeedback

Beállítás

Szervek / Csakrák / Homeopátiás szerek

Szervek

- Agy
- Tüdő
- Epehólyag
- Gyomor
- Bél
- Emésztő rendszer
- Hasnyálmirigy
- Máj
- Vese
- Mellékvese
- Hugyhólyag
- Vér
- Izom
- Csont
- Zsírejt

Csakrák

- Korona Csakra
- Homlok Csakra 3.szem
- Torok Csakra
- Szív Csakra
- Napfogat (Solar plexus) Csakra
- Szakrális (sex) Csakra
- Gyökér Csakra

Homeopátiás szer

| Homeopátiás szer    | Érték |
|---------------------|-------|
| Achyranthes Calea   | 4561  |
| Acidum Butyricum    | 5854  |
| Acidum Hippuricum   | 1363  |
| Acidum Sarcocoll... | 2212  |
| Acidum Sulfurosum   | 1101  |
| Aconitum            | 5378  |
| Aconitum Canma...   | 3403  |
| Aconitum Ferrox     | 4621  |
| Aconitum Lycoc...   | 5115  |
| Aconitum Napellus   | 2557  |
| Actaea Racemosa     | 1231  |
| Actaea Spicata      | 1238  |
| Adhesions           | 6011  |
| Adonis              | 81881 |
| Adonis Vernalis     | 1411  |

Start

Leállítás

Hertz: 5378

Időtartam(perc): 3

Hátralévő idő:

Jelerősség:

Manuális frekvencia generálás

Frekvencia:

0

Hullámforma:

Színusz

Időtartam(perc):

Viszszámítóló: 0

Generálás

Leállítás

Jelerősség:

Söprés (Sweep) funkció

Söprés indítása:

300

Söprés vége:

400

Söprés period (sec.):

2

Söprés indítása

Leállítás

## Páciensek

Ezen az oldalon felvehetünk pácienseket, akikhez személyre szabott frekvencia sorokat adhatunk hozzá. Egyedi frekvencia fájl megnyitására is van lehetőség, ami a program által testelemzést követően jön létre vagy akár külső forrásból is származhat. A megnyitandó fájlnak megfelelő "csv" formátumban kell lennie (Név; Terápia neve; Frekvencia értékek;....) Az összeállított frekvencia sorokat egyesével vagy akár egymás után is futtathatjuk.

**Páciensek:**

| Name      | Phone       | Address | e-mail            | Info |
|-----------|-------------|---------|-------------------|------|
| Test Elok | 06702351111 | Pécs    | elek0001@gmail... | ---  |

**Terápia kiválasztása:**

| Terápia                                           | Frv_1 | Frv_2 | Frv_3 | Frv_4 | Frv_5 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Álérzékenység_Parasthesia                         | 44686 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Allergia injekció_injection_allergic_reaction_to  | 10000 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Allergia                                          | 10000 | 880   | 787   | 727   | 3     |
| Álmosság_insonnia_sleep_also_Parasthesia_gener... | 3.59  | 3     | 7.83  | 10    | 1550  |
| Általános betegség_General_malady                 | 40000 | 10000 | 5000  | 0     | 0     |
| Általános betegség_General_malady                 | 700   | 11000 | 11000 | 5000  | 0     |

**Páciens terápiái:**

| Name      | Therapie                            | FRV1  | FRV2 | FRV3 | FRV4 |
|-----------|-------------------------------------|-------|------|------|------|
| Test Elok | Allergia                            | 10000 | 880  | 787  | 727  |
| Test Elok | Epehólyag fájdalom_Gallbladder_pain | 1550  | 800  | 0    | 0    |


**Terápia:** Allergia + Epehólyag fájdalom\_Gallbladder\_pain

## Testelemzés (Biofeedback) funkció

**Csak a Biofeedback verzióban elérhető!**

### Mérés

A szoftver képes a hangkártya kimenetén keresztül frekvenciát juttatni a testbe, amit a hangkártya bemenetén keresztül kiértékel. Ehhez a hangkártya csatlakozóiba 1-1 (egyet a fejhallgató kimenetbe a másikat a mikrofon bemenetbe) elektródát kell csatlakoztatni, amit ezután a testre kell helyezni. Frekvencia mintáknak az aktuális frekvencia adatbázist használja. A program a feltérképezés után a kapott adatokat átadja a kiértékeléshez és ezzel párhuzamosan egy fájlba is elmenti későbbi feldolgozás céljából. A "Mérés indítása" gomb megnyomásával indul a frekvenciák visszamérése. A kapott "nyers" adatokat az alsó bal oldali táblázat tartalmazza. A táblázat bal alsó sarka alatti szám jelzi, hogy hány frekvencia sort tartalmaz a táblázat. Ennek a számnak a 20%-át veszi figyelembe kiértékeléskor a program. Ettől az értéktől el lehet térni, ilyenkor a vizsgálni kívánt sorok számát kell megadni a beállítás oldalon a kiértékelés megkezdése előtt. Szíven a beállítás oldalon tudja a táblázatban szereplő mérési adatok sorbarendezeési értékeit módosítani. Alapértelmezett beállításának a jelerősség szerinti csökkenés van megadva.

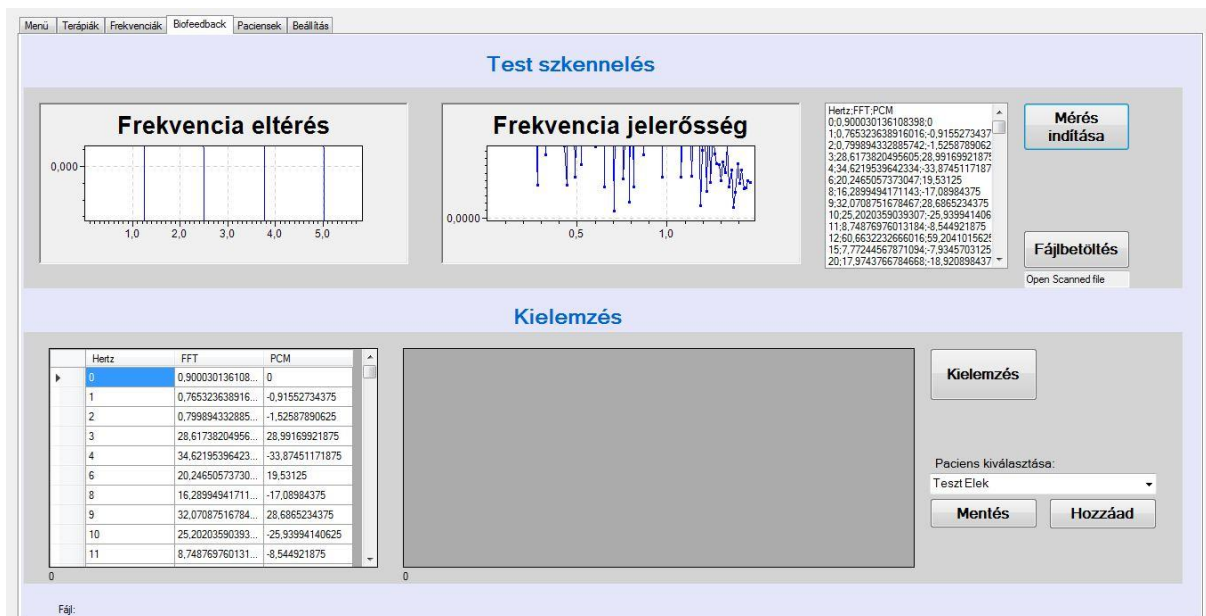

## Kiértékelés

A "Kiértékelés" gomb megnyomása után a kapott értékek a szoftver rangsorolja frekvencia előfordulás és frekvencia változások alapján. Az eredményeket megjeleníti egy táblázatban, ami megmutatja, hogy a változást mutató frekvenciát melyik terápia tartalmazza.

A táblázat megjelenít egy úgynevezett gyakoriság és egy relevancia értékét is. A gyakoriság megmutatja hogy az adott terápiában hány frekvencia mutatott eltérést. A relevancia érték a 10-től 100-ig terjed, ami az adott terápiában használt frekvenciák számához viszonyít. Például ha a terápia csak azt az egy frekvenciát tartalmazza amit a mérésnél kaptunk, akkor az érték 100, ha kettőt akkor az érték 90 és így tovább. 10-nél több frekvenciát tartalmazó terápiánál az érték 0. Amikor a "Relevancia" és a "Gyakoriság" értékek párhuzamosan változást mutatnak, akkor azokat a sorokat színekkel kiemelve is láthatjuk. A színek erősségének nincs jelentősége, csak a jobb átláthatóságot biztosítja.

A kiértékelés pontosításához a kiválasztott sorra való dupla klikkelés után megkapjuk azoknak a terápiák nevét, amiben az adott frekvencia érték még szerepel.

The screenshot shows a software window with a table of treatments and a dialog box. The table has columns for treatment names, frequency, and a selection checkbox. The dialog box lists additional treatments for the selected frequency of 160 Hz.

| Hertz | Kiválaszt                           |
|-------|-------------------------------------|
| 5     | <input type="checkbox"/>            |
| 8     | <input type="checkbox"/>            |
| 5     | <input type="checkbox"/>            |
| 10    | <input type="checkbox"/>            |
| 160   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20    | <input type="checkbox"/>            |
| 146   | <input type="checkbox"/>            |
| 255   | <input type="checkbox"/>            |
| 45    | <input type="checkbox"/>            |
| 73    | <input type="checkbox"/>            |
| 466   | <input type="checkbox"/>            |

160 Hz.-t tartalmazó további terápiák:  
 Homloküreg gyulladás\_Sinusitis  
 Izom sérülés\_Muscular\_pain\_injury\_also\_see\_Pain\_and\_General\_antiseptic  
 Pajzsmirigy alulműködés  
 Szem betegség\_Eye\_disorders

OK

## Frekvenciasor létrehozása

A kielemezés táblázat jobb oldali sávja tartalmaz jelölő négyzeteket. A jelölő négyzetek előtti oszlopban megtalálhatóak a frekvencia értékek. A jelölőnégyzetek kijelölésével összeválogathatjuk azokat a frekvenciákat, amikből az egyedi frekvencia sort akarjuk létrehozni. A kiértékelés táblázat jobb alsó sarka mellett lévő szemüveg ikonra kattintva információt kapunk a kiválasztott frekvenciákról.

Összeállított lista:

Páciens neve: Teszt Elek

Pajzsmirigy alulműködés 160 Hz.

Szemölcsdaganat jóindulatú daganat\_Papilloma\_virus\_causes\_warts\_and\_benign\_tumors\_having\_a\_branch\_o 45 Hz.

Fejfájás\_Headaches\_due\_to\_parasites\_see\_also\_Parasites\_strongyloides 73 Hz.

Szemölcs\_Warts\_general\_also\_see\_Papilloma\_and\_Parasites\_roundworms\_and\_flu kes 466 Hz.

Izom lazítás\_Muscles\_to\_relax 304 Hz.

Izom gyengeség\_Myositis\_involves\_progressive\_muscle\_weakness 120 Hz.

Fejfájás\_Headaches 520 Hz.

Cukorbeteg\_Diabetes\_associated\_infection 20 Hz.

8 \* 3 perc = 24 perc

OK

Mérés indítása

Fájl betöltés

Kiértékelés

Páciens kiválasztása:

Teszt Elek

Mentés

Hozzáad

|                                                     |   | 5  | 30  | 160                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---|----|-----|-------------------------------------|--|
| Pajzsmirigy alulműködés                             | 5 | 30 | 160 | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Sárgaság_Jaundice                                   | 5 | 0  | 20  | <input type="checkbox"/>            |  |
| Prosztata gyulladása_Prostatitis_benign_prostate... | 5 | 0  | 146 | <input type="checkbox"/>            |  |
| Lehangoltság_Distemper                              | 5 | 0  | 255 | <input type="checkbox"/>            |  |
| Szemölcsdaganat jóindulatú daganat_Papilloma...     | 4 | 0  | 45  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Fejfájás_Headaches_due_to_parasites_see_also...     | 4 | 50 | 73  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Szemölcs_Warts_general_also_see_Papilloma_a...      | 4 | 0  | 466 | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Higany_Mercury                                      | 4 | 70 | 49  | <input type="checkbox"/>            |  |
| Gutaütés_Apoplexy_stroke_paralysis                  | 4 | 0  | 40  | <input type="checkbox"/>            |  |

A kijelölt frekvenciákból a “Hozzáad” gomb megnyomásával hozzá adhatjuk a frekvencia sort a kijelölt páciens terápiájához. A “Mentés” gomb megnyomása esetén létrejön egy terápia fájl, amit tovább adhatunk egy másik Sziriusz szoftver számára vagy később betölthetjük a saját pácienseink terápiájához.

Páciens terápiái:

|   | Név        | Terápiák              | FRV1 | FRV2 | FRV3 | FRV4 | FRV5 | FRV6 | FRV7 | FRV8 | FRV9 |
|---|------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ▶ | Teszt Elek | Szkennelt frekvenciák | 160  | 45   | 73   | 466  | 304  | 120  | 520  | 20   | 0    |
| * |            |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Terápia: Szkennelt frekvenciák

Terápia hossza: 24 min.


A pácienshez hozzáadott frekvenciasor a “Szkennelt frekvenciák” néven látható a páciens terápiái között.

## Beállítások


A beállítások oldalon beállíthatjuk a frekvencia generálás kimenő jelalakját. Megadhatjuk hogy a kiértékelés előtt a mért értékek sorba rendezése milyen paraméterek alapján történjen. Alapbeállítás szerint a legnagyobb jel erősségtől rendez csökkenő jelerősség felé. Kiértékelésnél az összes frekvencia vizsgálva van és bekerül a táblázatba releváns értéktől függetlenül, ezért meg kell adni hogy elemzésnél a táblázatban listázott értékeket hányadik sorig vegyük figyelembe. Ez általában az kiértékelésnél kapott összes sor 10-30 százaléka legyen(alapbeállítás 20%). Terápiára kereshetünk egy frekvencia megadásával. Nyelvet válthatunk, ilyenkor a terápia adatbázis nyelve is változik.

## Test szkennelés beállításai, hibák elhárítása

Amennyiben a számítógép rendelkezik beépített mikrofonnal, akkor azt a program használata előtt le kell tiltani!

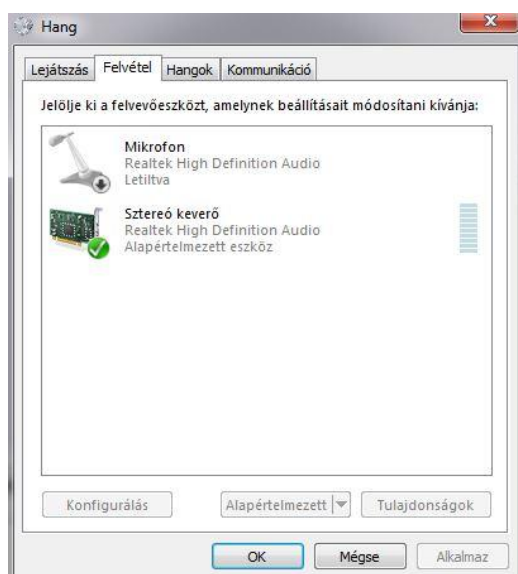


Amennyiben nincs alapértelmezett rögzítőeszköz kiválasztva a Windows hangeszközöknél, akkor a program indításánál a következő hibaüzenetet kapja:

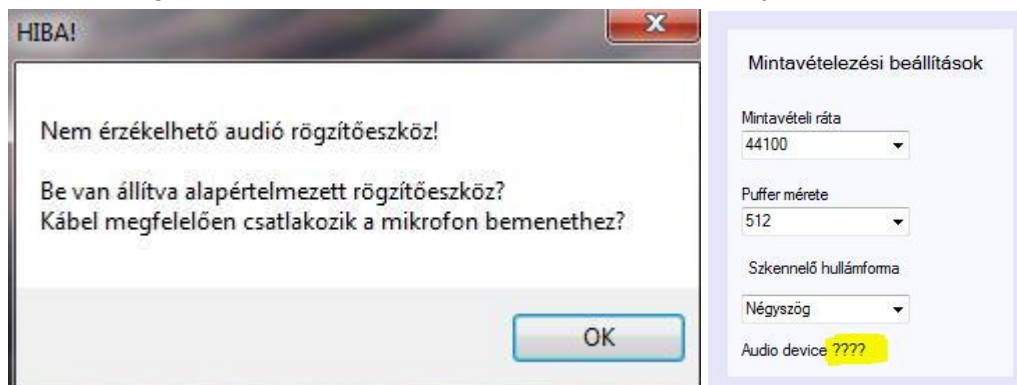

A beállítás oldalon a "Mintavételezési beállítások" doboz alsó sorában az "Audio device" "???" szöveg látható.

Ilyenkor lépjen ki a programból és állítson be egy rögzítőeszközt, amibe a mérésnél használt elektródákat csatlakoztatni fogja. Megfelelő beállításnál "Mintavételezési beállítások" doboz alsó sorában a "0:"érték után a beállított eszköz nevének kell megjelennie.

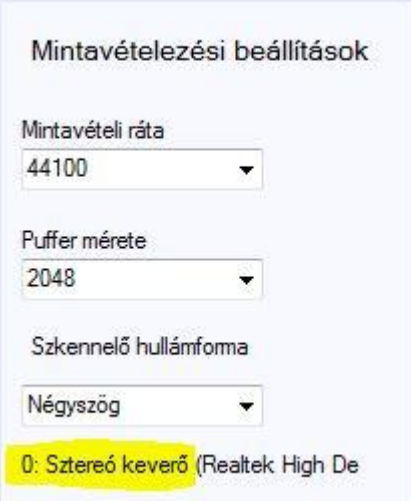

**Mintavételezési beállítások**


Mintavételi ráta  
44100

Puffer mérete  
2048

Szkenelő hullámforma  
Négyszög

0: Sztereó keverő (Realtek High De

A szkennelés elindítása után az alábbi listában soronként különböző értékeket kell kapnia. Amennyiben a sorok ismétlődő értékeket tartalmaznak, akkor a mérés sikertelen.

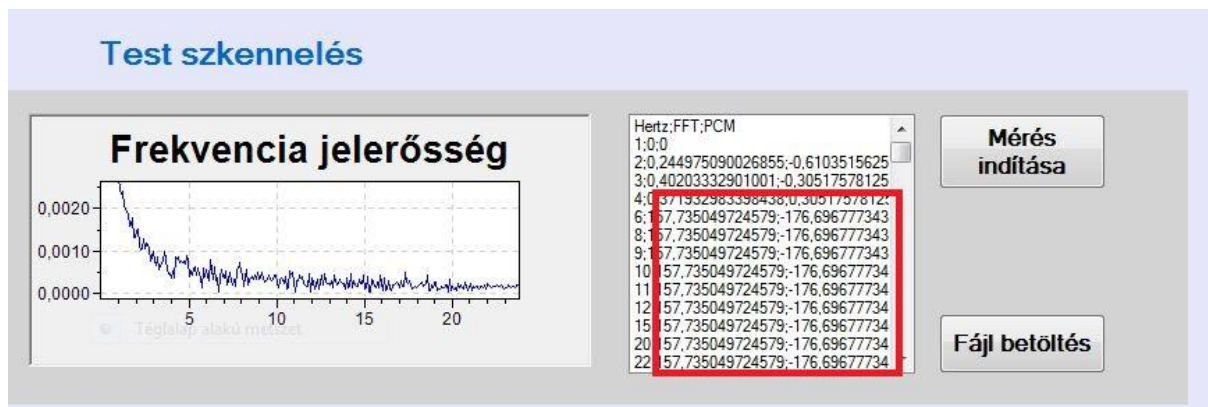

Ebben az esetben először ellenőrizze a mintavételezéshez használt elektródák megfelelően csatlakoznak a testhez, illetve a hangkártya ki és bemeneti csatlakozójába. Ha a csatlakozás rendben van, akkor állítsa kisebb értékre a mintavételezési puffer méretét.

The screenshot displays two panels from the Sziriusz software. The left panel, titled 'Analízis értékelésénél figyelembe vett eredmény sorok száma:', contains a text input field with the value '50'. The right panel, titled 'Mintavételezési beállítások', contains several settings: 'Mintavételi ráta' (44100), 'Puffer mérete' (2048, circled in red), 'Szkenelő hullámforma' (Négyszög), and '0: Sztereó keverő (Realtek High De'.

### Szoftver tulajdonságai

- Dr. Rife (CAFL) adatbázis (Magyar, Angol és Német nyelven).
- Szervek frekvenciái.
- Csakrák, energiaközpontok frekvenciái.
- Homeopátiás szerek adatbázisa
- Manuális frekvencia beviteli lehetőség.
- Söprés funkció (Sweep) két megadott érték közötti frekvencia generálás.
- Páciensek nyilvántartása, személyre szabott frekvenciasorok összeállítása.
- Adatbázis szerkeszthetősége.
- Terápia adatbázis és páciens frekvencia fájlok betöltése más forrásból. ("csv" formátumban).
- Frekvencia jelalakok: Szinusz, Négyszög, Háromszög, Fűrészfog.
- Frekvencia tartomány: 1-20.000 Hertz között.
- Telepítésnél választható nyelvek: Magyar, Angol és Német.

### Figyelmeztetés!

A szoftver nem minősül gyógyászati eszköznek!

Diagnosztizálásra nem alkalmas!

A Sziriusz szoftver kifejezetten kísérletezési céllal készült!

A szoftvert mindenki csak saját felelősségére használhatja!